

ハンドスケーリング

Hand Scaling

グレーシーキュレットの歴史	A02
グレーシーキュレットの選択方法	A04
グレーシーキュレット オリジナル	A06
グレーシーキュレット アフターファイブ	A09
グレーシーキュレット ミニファイブ	A12
グレーシーキュレット マイクロミニファイブ	A14
グレーシーキュレット バイオジェント	A15
グレーシーキュレット オオタタイプ	A16
ユニバーサルキュレット	A17
シックルスケーラー (鎌形)	A21
部位特定キュレット	A24
ホースケーラー／チゼルスケーラー	A25
ファイルスケーラー	A26
スケーラーアクセサリ	A28
歯科用インスツルメントの構造	A29
シャンクの柔軟性／インスツルメントのバランス・刻印	A30

Gracey Curette History


グレイシーキュレットの歴史

1940年代、ミシガン大学の歯科医師クレイトン・グレイシー博士が、「歯周ポケットが深くても浅くても、歯肉を傷つけることなく痛みも伴わないように簡単に治療できるインスツルメント」のアイデアをヒューフレディの創始者であるヒューゴ・フリードマンに持ちかけ、彼らは共に14種類の部位特定片頭インスツルメントを開発しました。

Dr. グレイシーのデザインは、今日の新しいインスツルメントの基礎を築き、現在グレイシーキュレットは、ハンドルおよびブレードの種類が豊富になり、両頭インスツルメントとして広く利用されています。

ヒューフレディグループでは、Dr.グレイシーが開発したオリジナルのグレイシーキュレットの他に、第一シャンクが長くブレード幅が薄いアフターファイブ (After Five™)や、アフターファイブ (After Five™)の特徴に短いブレードを組み合わせたミニファイブ (Mini Five™)、ミニファイブのブレードを薄くし、歯肉への挿入がより容易で歯周組織への負担を軽減するマイクロミニファイブ (Micro Mini Five™) そして、15/16 (FIT11/12)や17/18 (FIT13/14)など、様々なタイプのグレイシーキュレットを製造しています。また、シャンクがリジッドタイプの製品も揃えています。

ヒューフレディグループは、既存の製品を改良する新しい道を常に模索しています。そして、その成功はビジョンを現実にし、現在の歯科治療になくてはならないものを創ったクレイトン・グレイシー博士をはじめとする歯学のパイオニア達に捧げられています。

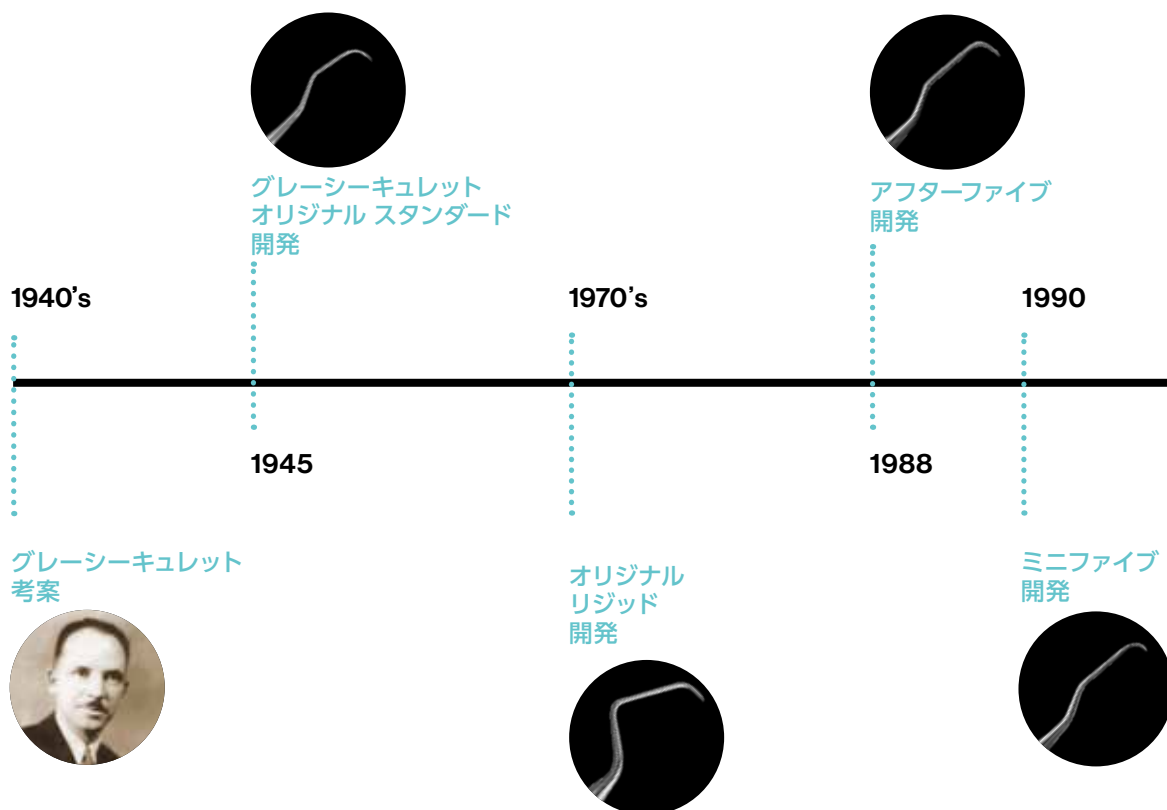



クレイトン・グレイシー博士



ヒューゴ・フリードマン

ヒューフレディグループは、グレイシーキュレットを 世界で初めて開発したパイオニアです！



FITシリーズ
(15/16、17/18)
開発

1990's

2000's

エバーエッジ
テクノロジー
開発





マイクロミニファイブ
開発

2008

2016

エバーエッジ2.0
テクノロジー
開発

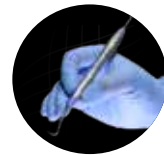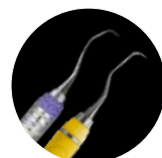

ハーモニー
エルゴノミック
スケーラー
開発

2020

How to Choose Gracey Curettes

グレイシーキュレットの選択方法

種類豊富なグレイシーキュレットを、ハンドルの種類・ブレードとシャンクの形状・シャンクの硬さ・番手の順に選択し、簡単に必要な1本を見つける方法です。

①ハンドルの種類

【作業部の材質】

エバーエッジ (EverEdge™) 2.0

ヒューフレディグループがキュレット・スケーラーのエッジのシャープさをより持続するために開発した優れた合金。ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、3段階の熱処理の温度・時間設定を改善し、ブレードの表面処理を向上させ、パリの発生を抑制する合金です。



#XE2 ハーモニー (Harmony™)

人間工学に基づく技術「トゥルーフィット (TrueFit™) テクノロジー」で設計されたハンドル。(パープルのグリップを標準装着)



#9E2 エバーエッジ (EverEdge™)

人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるようなダイヤモンドパターン。(パープルのグリップを標準装着)



#C8E2 レジン8カラー (Resin 8 Colors)

レジン製のため軽量。滑りにくくしっかり把持できるように波形の溝とダイヤモンドカットを組み合わせた表面形状。使用部位ごとにハンドルの色が違うので、処置中のスケーラー識別が容易。(ハンドルと同色のグリップを標準装着)



【作業部の材質】

イミュニティスチール (Immunity Steel™)

ヒューフレディグループで独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。



#7 サテンスチールカラー (Satin Steel™ Colours™)

シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着)



#6 サテンスチール (Satin Steel™)

力の弱い方でも力を入れずにリラクシングして持つことができる太いハンドル。ウォーターウェーブのすべり止め。




#2 角柄

8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。



②ブレードとシャンクの形状

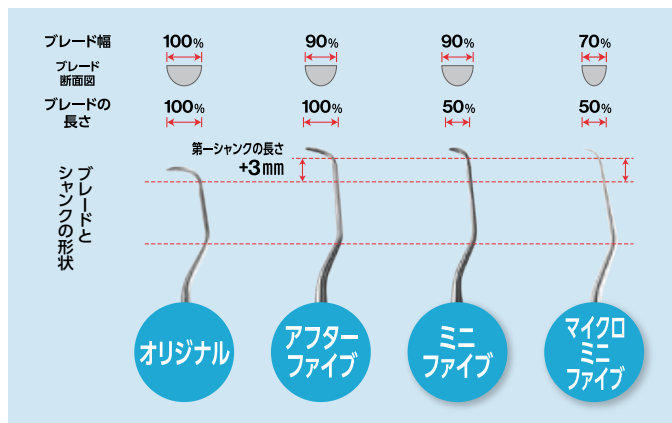

オリジナル (Original)

現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、グレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。

アフターファイブ (After Five™)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。


ミニファイブ (Mini Five™)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリジナルとアフターファイブ (After Five™) の半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

マイクロミニファイブ (Micro Mini Five™)


5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルより30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。

③シャンクの硬さ

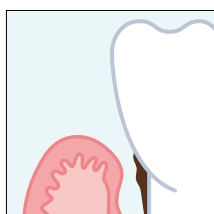


スタンダード (Standard)

細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。超音波スケアーリング後の仕上げとして細かなスケアーリングやルートプレーニングに使用。

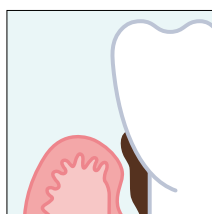

リジッド (Rigid)

スタンダードシャンクに比べ太くて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。


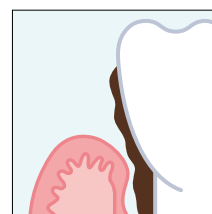


エクストラリジッド (Extra Rigid)

エクストラリジッドシャンクのグレイシーキュレットは殆どしなりがないので、全体の初期スケアーリングや強固な歯石除去に使用。




④ 使用部位

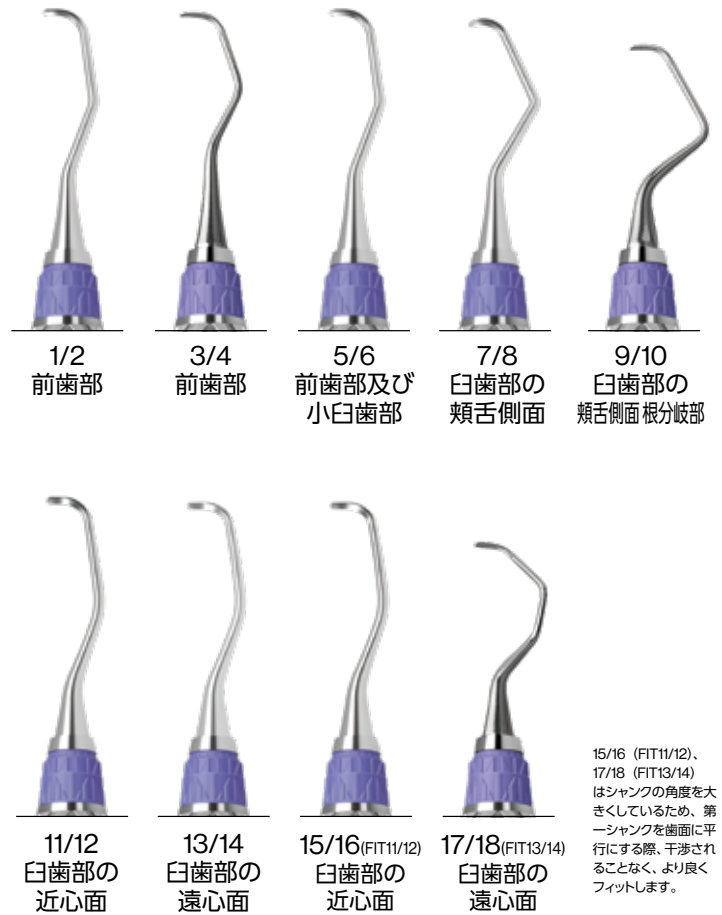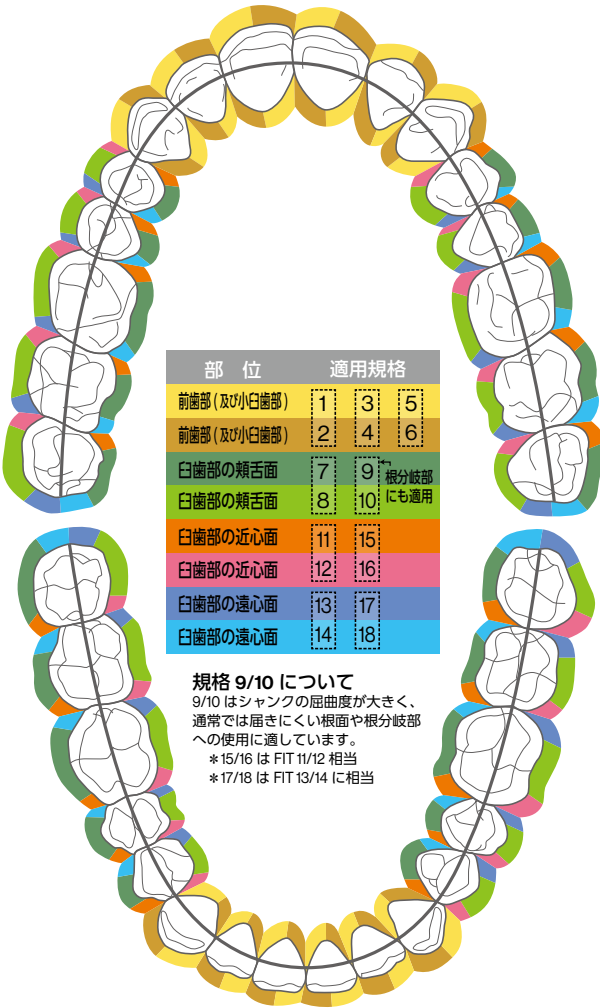

ハンドスケーリング Hand Scaling

■ スケーラー・キュレットに印字されているパートコードの読み方

スケーラーの裏側に記載されているパートコードを読めば、オーダーが簡単です。

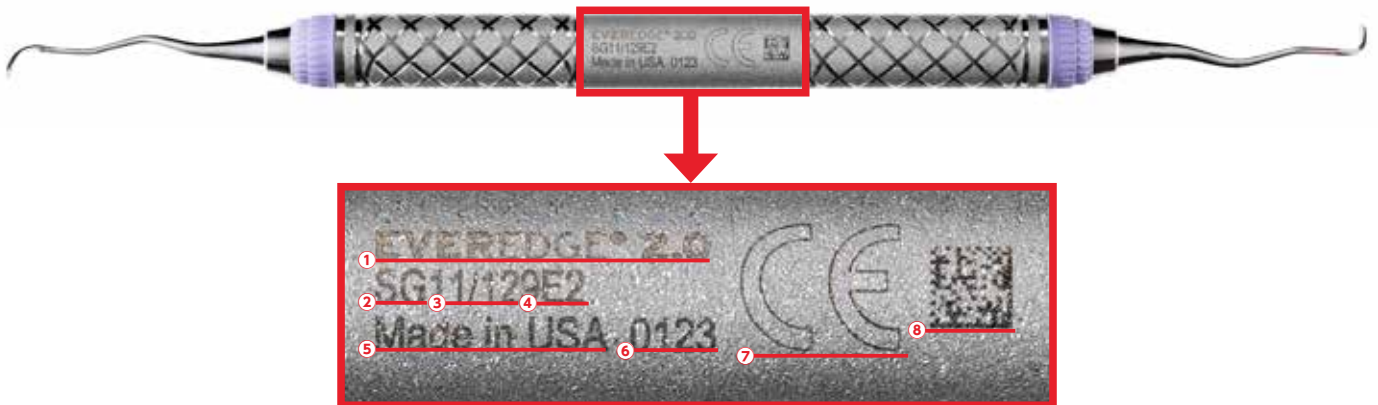


- ① **EVEREDGE™ 2.0** エバーエッジ2.0のロゴ
- ② **SG.....** スケーラーの種類
例) グレイシー SG...オリジナル、SRPG SRP SP...アフターファイブ
SASS...ミニファイブ、SMS...マイクロミニファイブ
シッコル SH...衛生士用、SCNEVI...ネビィ
- ③ **11/12.....** 番手
例) 1/2, 3/4, 5/6 (※F11/12=15/16、F13/14=17/18)
- ④ **9E2.....** ハンドル番号
例) XE2...ハーモニー、9E2...エバーエッジ、C8E2...レジン8カラー
7...サテンスチールカラー、6...サテンスチール
※2番ハンドル (角柄) の場合はハンドル番号は記載されていません。
- ⑤ **Made in USA** 原産国
- ⑥ **0123** 製造年月
最初の2桁=月、後の2桁=年 例) 2023年1月生産分=0123
- ⑦ **CE** 欧州 (EU) 連合の基準適合マーク
- ⑧ **QRコード** GTINコードと製造年月の情報



グレイシーキュレット オリジナル

現在世界のグレイシーキュレットの基準となっているグレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。特定の部位に適合するようデザインされています。

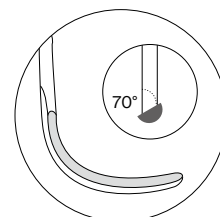

グレイシーキュレットのブレード角度

■ グレイシーキュレット オリジナル



掲載画像 SG1/2XE2

スタンダード 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG1/2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG1/29E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG1/2C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SG1/27	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG1/26	5,600円	#6	サテンスチール	
SG1/2	5,200円	#2	角柄	

前歯用

リジッド 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG1/2RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG1/2R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG1/2RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SG1/2R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG1/2R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR1/2R	5,200円	#2	角柄	

前歯用



掲載画像 SG3/4XE2

スタンダード 3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG3/4XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG3/49E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG3/4C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	☺
SG3/47	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG3/46	5,600円	#6	サテンスチール	
SG3/4	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用

リジッド 3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG3/4RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG3/4R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG3/4RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	☺
SG3/4R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG3/4R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR3/4R	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用



掲載画像 SG5/6XE2

● スタンダード 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG5/6XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG5/69E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG5/6C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SG5/67	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG5/66	5,600円	#6	サテンスチール	
SG5/6	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

リジッド 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG5/6RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG5/6R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG5/6RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SG5/6R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG5/6R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR5/6R	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

エクストラリジッド 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG5/6ER7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

前歯および小臼歯用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

グレイシーキュレット オリジナル
Gracey Curettes, Original



ハンドスケーリング Hand Scaling

掲載画像 SG7/8XE2



● **スタンダード 7/8**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/8XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG7/89E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG7/8C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SG7/87	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG7/86	5,600円	#6	サテンスチール	
SG7/8	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/8RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG7/8R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG7/8RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SG7/8R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG7/8R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR7/8R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

エクストラリジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/8ER7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の頬舌側面用

掲載画像 SG9/10XE2



スタンダード 9/10

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG9/10XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG9/109E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG9/10C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	☺
SG9/107	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG9/106	5,600円	#6	サテンスチール	
SG9/10	5,200円	#2	角柄	☺

臼歯の頬舌側面・根分岐部用

リジッド 9/10

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG9/10RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG9/10R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG9/10R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG9/10R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR9/10R	5,200円	#2	角柄	☺

臼歯の頬舌側面・根分岐部用

掲載画像 SG11/12XE2



● **スタンダード 11/12**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/12XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG11/129E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG11/12C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SG11/127	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG11/126	5,600円	#6	サテンスチール	
SG11/12	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/12RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG11/12R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG11/12RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SG11/12R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG11/12R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR11/12R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

エクストラリジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/12ER7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の近心面用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニ



#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (7/8, 9/10) ■グリーン



#C8E2 レジン8カラー (11/12, 15/16) ■オレンジ



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

標準価格は全て税抜価格です。

A07



掲載画像 SG13/14XE2

● **スタンダード 13/14**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/14XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG13/149E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG13/14C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SG13/147	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG13/146	5,600円	#6	サテンスチール	
SG13/14	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/14RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG13/14R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG13/14RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SG13/14R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG13/14R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR13/14R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

エクストラリジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/14ER7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の遠心面用



掲載画像 SG15/16XE2

スタンダード 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG15/16XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG15/169E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG15/16C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SG15/167	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG15/166	5,600円	#6	サテンスチール	
SG15/16	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)

リジッド 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG15/16RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG15/16R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG15/16RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	☺
SG15/16R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG15/16R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR15/16R	5,200円	#2	角柄	☺

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)



掲載画像 SG17/18XE2

スタンダード 17/18

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG17/18XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG17/189E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG17/18C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SG17/187	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG17/186	5,600円	#6	サテンスチール	
SG17/18	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用(ブレードはやや小さく、第一シャンクは、やや長めにデザインされています)

リジッド 17/18

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG17/18RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG17/18R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG17/18RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	☺
SG17/18R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG17/18R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR17/18R	5,200円	#2	角柄	☺

臼歯の遠心面用(ブレードはやや小さく、第一シャンクは、やや長めにデザインされています)

※リジッドシャンクはスタンダードシャンクに比べて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー

#9E2 エパーエッジ

#C8E2 レジン8カラー (11/12、15/16) ■オレンジ

#C8E2 レジン8カラー (13/14、17/18) ■ブルー

#7 サテンスチールカラー

#6 サテンスチール

#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

グレイシーキュレット アフターファイブ
Gracey Curettes, After Five™



ハンドスケーリング Hand Scaling

Gracey
Curettes,
After Five™

グレイシーキュレット アフターファイブ

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。

オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

■ グレイシーキュレット アフターファイブ



掲載画像 SRPG1/2XE2

スタンダード 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG1/2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG1/29E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SRPG1/2C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SRPG1/27	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG1/26	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG1/2	5,200円	#2	角柄	

前歯用

リジッド 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP1/2RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP1/2R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SRP1/2RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SRP1/2R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRP1/2R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG1/2R	5,200円	#2	角柄	

前歯用



掲載画像 SRPG3/4XE2

スタンダード 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG3/4XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG3/49E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	🕒
SRPG3/4C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	🕒
SRPG3/47	5,800円	#7	サテンスチールカラー	🕒
SRPG3/46	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG3/4	5,200円	#2	角柄	🕒

前歯用

リジッド 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP3/4RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP3/4R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	🕒
SRP3/4RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	🕒
SRP3/4R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	🕒
SRP3/4R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG3/4R	5,200円	#2	角柄	🕒

前歯用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (1/2, 3/4) ■グレー



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

標準価格は全て税抜価格です。

A09

掲載画像 SRPG5/6XE2



● **スタンダード 5/6**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG5/6XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG5/69E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRPG5/6C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SRPG5/67	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG5/66	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG5/6	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

リジッド 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP5/6RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP5/6R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRP5/6RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SRP5/6R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRP5/6R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG5/6R	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

エクストラリジッド 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP5/6E7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

前歯および小臼歯用

掲載画像 SRPG7/8XE2



● **スタンダード 7/8**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG7/8XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG7/89E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRPG7/8C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SRPG7/87	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG7/86	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG7/8	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP7/8RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP7/8R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRP7/8RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SRP7/8R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRP7/8R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG7/8R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

エクストラリジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP7/8E7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の頬舌側面用

掲載画像 SRPG11/12XE2



● **スタンダード 11/12**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG11/12XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG11/129E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRP11/12C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRPG11/127	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG11/126	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG11/12	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP11/12RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP11/12R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRP11/12RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRP11/12R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRP11/12R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG11/12R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

エクストラリジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP11/12E7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の近心面用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (5/6) ■イエロー



#C8E2 レジン8カラー (7/8, 9/10) ■グリーン



#C8E2 レジン8カラー (11/12, 15/16) ■オレンジ



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

● おすすめ品

☑ 取寄品

取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

グレイシーキュレット アフターファイブ Gracey Curettes, After Five™



掲載画像 SRPG13/14XE2



● スタンダード 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG13/14XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG13/149E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SRP13/14C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SRPG13/147	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG13/146	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG13/14	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP13/14RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP13/14R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SRP13/14RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SRP13/14R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRP13/14R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG13/14R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

エクストラリジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP13/14E7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の遠心面用

掲載画像 SRPG15/16XE2



スタンダード 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG15/16XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG15/169E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SRP15/16C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRPG15/167	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG15/166	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG15/16	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)

リジッド 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP15/16RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP15/16R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☑
SRP15/16RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRP15/16R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☑
SRP15/16R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG15/16R	5,200円	#2	角柄	☑

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (11/12、15/16) ■オレンジ



#C8E2 レジン8カラー (13/14、17/18) ■ブルー



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

標準価格は全て税抜価格です。

ハンドスケーリング Hand Scaling

Gracey
Curettes,
Mini Five™

グレイシーキュレット ミニファイブ

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。

ブレードはオリジナルとアフターファイブの半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。

オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

グレイシーキュレット ミニファイブ



掲載画像 SAS1/2XE2

スタンダード 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS1/2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS1/29E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SAS1/2C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SAS1/27	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS1/26	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS1/2	5,200円	#2	角柄	

前歯用

リジッド 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS1/2RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS1/2R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SAS1/2RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SAS1/2R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS1/2R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS1/2R	5,200円	#2	角柄	

前歯用



掲載画像 SAS3/4XE2

スタンダード 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS3/4XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS3/49E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺
SAS3/4C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	☺
SAS3/47	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SAS3/46	5,600円	#6	サテンスチール	☺
SAS3/4	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用

リジッド 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS3/4RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS3/4R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺
SAS3/4RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	☺
SAS3/4R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SAS3/4R6	5,600円	#6	サテンスチール	☺
SAS3/4R	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用



掲載画像 SAS5/6XE2

● スタンダード 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS5/6XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS5/69E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SAS5/6C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SAS5/67	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS5/66	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS5/6	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

リジッド 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS5/6RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS5/6R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SAS5/6RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SAS5/6R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS5/6R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS5/6R	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (1/2、3/4) ■グレー



#C8E2 レジン8カラー (5/6) ■イエロー



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

● おすすめ品

☑ 取寄品

取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

グレイシーキュレットミニファイブ Gracey Curettes, Mini Five™



● スタンダード 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS7/8XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS7/89E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS7/8C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SAS7/87	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS7/86	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS7/8	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS7/8RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS7/8R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS7/8RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SAS7/8R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS7/8R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS7/8R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用



● スタンダード 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS11/12XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS11/129E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS11/12C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SAS11/127	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS11/126	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS11/12	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS11/12RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS11/12R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS11/12RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SAS11/12R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS11/12R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS11/12R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用



● スタンダード 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS13/14XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS13/149E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS13/14C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SAS13/147	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS13/146	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS13/14	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS13/14RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS13/14R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS13/14RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SAS13/14R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS13/14R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS13/14R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用



スタンダード 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS15/16XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS15/169E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS15/16C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SAS15/167	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS15/166	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS15/16	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)

リジッド 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS15/16RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS15/16R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☑
SAS15/16RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	☑
SAS15/16R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☑
SAS15/16R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS15/16R	5,200円	#2	角柄	☑

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)



スタンダード 17/18

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS17/18XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	

臼歯の遠心面用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

標準価格は全て税抜価格です。

**Gracey
Curettes, Micro
Mini Five™**

グレイシーキュレット マイクロミニファイブ

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。
シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルより30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。

■ グレイシーキュレット マイクロミニファイブ

掲載画像 SMS1/2XE2



リジッド 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS1/2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SMS1/29E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

前歯用

掲載画像 SMS7/8XE2



リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS7/8XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SMS7/89E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の頬舌側面用

掲載画像 SMS11/12XE2



リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS11/12XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SMS11/129E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の近心面用

掲載画像 SMS13/14XE2



リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS13/14XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SMS13/149E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の遠心面用


ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ

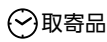

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



グレイシーキュレット バイオジェント

- ・薄いブレードで、狭いポケットにも容易にアクセス!
- ・これまで以上に、組織に優しいアプローチと歯周ポケットへの良好なアクセスを提供!
- ・アフターファイブ、ミニファイブ、マイクロミニファイブのコンセプトをバランス良く調和!
- ・歯周治療の世界的名医コーテリーニ先生ご考案!

【オリジナルとの比較】
ブレードの幅
-20%

【オリジナルとの比較】
シャンクの硬さ
リジッド

【オリジナルとの比較】
ブレードの長さ
-25%



グレイシーキュレット バイオジェント



1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG1/29LCE2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

前歯用



7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/89LCE2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の頬舌側面用



11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/129LCE2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の近心面用



13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/149LCE2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の遠心面用

ハンドルの種類



#9E2 エバーエッジ

※バイオジェントキュレットのグリップの色は番手によって異なります。



グレイシーキュレット オオタタイプ

ブレードの長さがグレイシーキュレットオリジナルの2/3になったタイプです。日本人の小さな歯牙用に開発されました。




■ グレイシーキュレット オオタタイプ



1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG01/2	5,600円	#2	角柄	
前歯用				



3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG03/4	5,600円	#2	角柄	
前歯用				

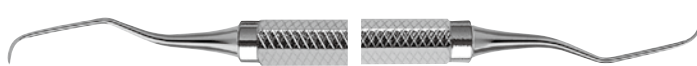

5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG05/6	5,600円	#2	角柄	
前歯および小臼歯用				



7/8				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG07/8	5,600円	#2	角柄	
臼歯の頬舌側面用				



9/10				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG09/10	5,600円	#2	角柄	
臼歯の頬舌側面・根分岐部用				




11/12				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG011/12	5,600円	#2	角柄	
臼歯の近心面用				



13/14				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG013/14	5,600円	#2	角柄	
臼歯の遠心面用				

ハンドルの種類

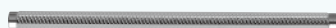

#2 角柄




取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



ユニバーサルキュレット

歯肉縁上および歯肉縁下に付着した歯石除去に使用するキュレットです。ブレード部分はシャンクに対して90°の角度が付けられており、二つの平行なカッティングエッジが丸みを持たせた先端部で接合するようになっています。

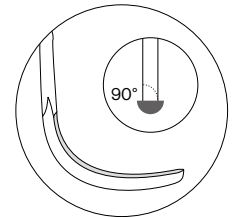

ユニバーサルキュレットのブレード角度

■ ユニバーサルキュレット ランガー (Langers)

ランガーキュレットは、グレーシーキュレットのシャンクのデザインとユニバーサルキュレットの両刃のブレードの組み合わせで(ブレードの角度:90°)、4種ですべての歯面のスケールリングが可能です。

歯周病専門医でコロンビア大学の前臨床教授のバートン・ランガー先生により、1985年に考案されました。



掲載画像 SL1/2XE2

ランガー 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL1/2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SL1/29E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SL1/2C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

下顎臼歯用



掲載画像 SL3/4XE2

ランガー 3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL3/4XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SL3/49E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SL3/4C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

上顎臼歯用



掲載画像 SL5/6XE2

ランガー 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL5/6XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SL5/69E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SL5/6C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

前歯用



掲載画像 SL17/18XE2

ランガー 17/18				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL17/18XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SL17/189E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SL17/18C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

上下顎臼歯用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2ハーモニー



#9E2 エパーエッジ



#C8E2レジン8カラー (13/14) ■ラベンダー



ランガー ミニファイブ 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL1/2MF9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

下顎臼歯用



ランガー ミニファイブ 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL3/4MF9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

上顎臼歯用




ランガー ミニファイブ 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL5/6MF9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	


前歯用

ランガーキュレットは、グレーシーキュレットのシャンクのデザインとユニバーサルキュレットのブレードの組み合わせです。これらのインストルメントですべての歯面のスケーリングが可能です。

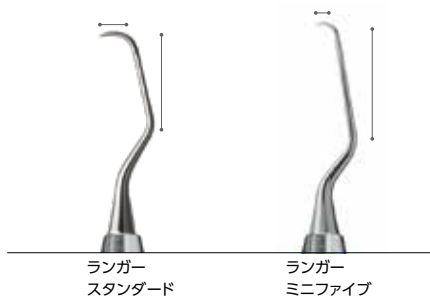

- ミニファイブ (Mini Five™) の第一シャンクは、通常のランガーより3mm長く、5mm以上の深い歯周ポケットや根面に届きやすいデザインです。
- ブレードが10%薄く、歯肉への挿入が容易で組織の腫脹を軽減します。
- ミニファイブ (Mini Five™) は、ブレードが通常のランガーの半分のサイズで、狭いポケットや根分岐部に適しています。

ランガー使用部位チャート

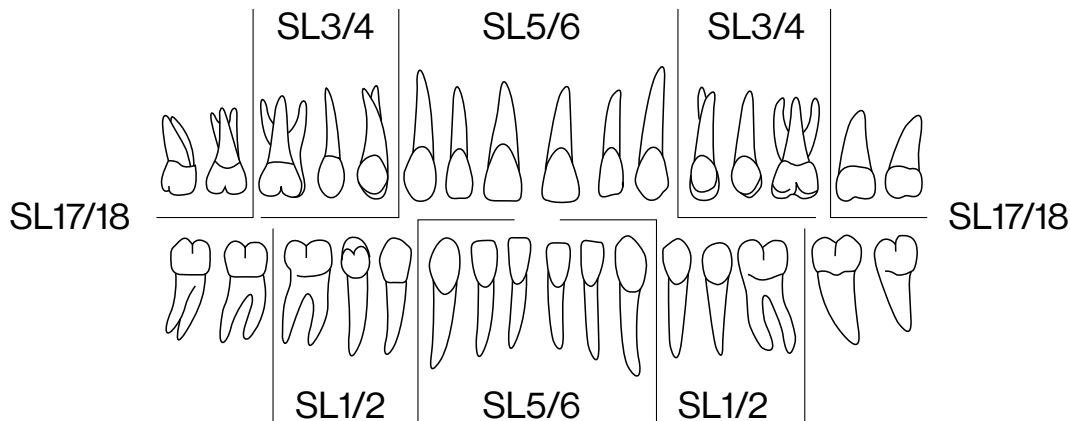

ハンドルの種類



#9E2 エバーエッジ



■ ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 (Columbia University)

コロンビア大学型キュレットは、元々、1930年代にコロンビア大学のイサドール・ハーシュフェルト先生により考案されました。3種のコロンビア大学型デザインには、長年にわたり蓄積されてきた英知が結集しています。

掲載画像 SC2R/2LXE2



2R/2L

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SC2R/2LXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SC2R/2L9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SC2R/2LC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	☺

前歯用

掲載画像 SC4R/4LXE2



● 4R/4L

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SC4R/4LXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SC4R/4L9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SC4R/4LC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

臼歯用

掲載画像 SC13/14XE2



● 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SC13/14XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SC13/149E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SC13/14C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

ユニバーサル

■ ユニバーサルキュレット バーンハルト (Barnhart)



1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SBH1/29E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	



5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SBH5/69E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (13/14) ■ラベンダー

ユニバーサルキュレット インディアナ大学型 (Indiana University)



13/14 前歯用				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SIU13/146	5,600円	#6	サテンスチール	☺



17/18 臼歯用				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SIU17/186	5,600円	#6	サテンスチール	☺

ユニバーサルキュレット マッコール (McCall)



掲載画像 SM17/18XE2

ユニバーサルキュレット マッコール 17/18				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SM17/18XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SM17/189E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

ユニバーサルキュレット ヤンガーグッド (Younger-Good)



7/8				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SYG7/89E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

ユニバーサルキュレット 23A



23A				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SM23A9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#6 サテンスチール

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。


シッルスケーラー (鎌形)
Sickle Scalers



Sickle Scalers


シッルスケーラー (鎌形)

歯肉縁上の歯石除去に使用します。

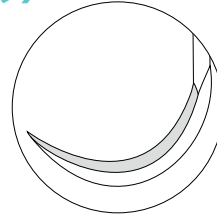

曲のシッルスケーラー

曲線上のブレードの両側にあるカッティングエッジが先端まで伸び、鋭利な先端を形成しています。

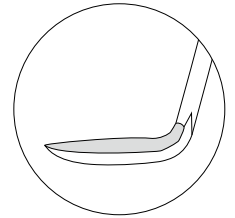

直のシッルスケーラー

直線状のブレードの両側にあるカッティングエッジが先端まで伸び、鋭利な先端を形成しています。ジャケットスケーラーとしても知られています。

掲載画像 SH6/7XE2



● 衛生士用 H6/H7

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SH6/7XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SH6/79E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SH6/7C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■パープル	
SH6/77	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SH6/76	5,600円	#6	サテンスチール	
SH6/7	5,200円	#2	角柄	

超薄型コントラアングルのデザイン。隣接歯間部に適しています。シャングのアンブルにより前歯部および小臼歯部に対応できます。

掲載画像 SH5/33XE2



● 衛生士用 H5/33

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SH5/33XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SH5/339E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SH5/33C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■パープル	
SH5/337	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SH5/336	5,600円	#6	サテンスチール	
SH5/33	5,200円	#2	角柄	

非常に薄い曲と直のブレードのコンビネーション。前歯部の歯頸部や歯間部のスケーリングに適しています。

掲載画像 S204SX2



204S

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
S204SX2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
S204S9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
S204SC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	🕒

白歯部歯肉縁上の隣接歯間部用。

掲載画像 S204SDXE2



● 204SD

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
S204SDXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
S204SD9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
S204SDC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	
S204SD7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
S204SD6	5,600円	#6	サテンスチール	
S204SD2	5,200円	#2	角柄	

コントラアングルのシャングデザインにより、白歯部遠心面に適しています。

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#C8E2 レジン8カラー ■パープル
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#C8E2 レジン8カラー ■レッド
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール




#2 角柄

標準価格は全て税抜価格です。

■ スケーラー ネビィ (Nevi™)

シッルスケーラーネビィシリーズは、40年以上のキャリアを持つベテラン職人と口腔解剖学を熟知した臨床家の手によって共同開発されたスケーラー群です。

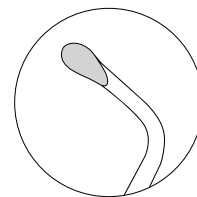

掲載画像 SCNEVI1XE2



● ネビィ1 前歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEVI1XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SCNEVI19E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SCNEVI1C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■パープル	
SCNEVI17	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SCNEVI1	5,600円	#6	サテンスチール	

曲のシッルスケーラーとスプーン型の作業部で、前歯に使用します。特に舌側面のスケーリングに有効です。



下顎右側切歯の舌側面



掲載画像 SCNEVI2XE2

● ネビィ2 臼歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEVI2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SCNEVI29E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SCNEVI2C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	
SCNEVI27	5,800円	#7	サテンスチールカラー	🕒
SCNEVI2	5,600円	#6	サテンスチール	🕒

曲のシッルスケーラーで、臼歯に使用します。細いブレードなので、隣接歯間部に使いやすく、シャンクも歯面に適合させやすいデザインです。



左側第二大臼歯の遠心面




掲載画像 SCNEVI3XE2

● ネビィ3 臼歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEVI3XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SCNEVI39E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SCNEVI3C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	

細くスレンダーな両面カッティングエッジ(両刃)。狭小なコンタクトや隣接歯間部に適しています。コントラアングルのシャンクデザインにより臼歯へ適合させやすいデザインです。

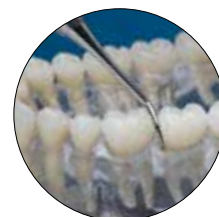

下顎左側第二大臼歯の近心面



掲載画像 SCNEVI4XE2

● ネビィ4 臼歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEVI4XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SCNEVI49E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SCNEVI4C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	

先端に従って細くなっていくテーパー型の両面カッティングエッジ(両刃)。長いブレードが、臼歯の歯冠形態に沿うため、遠心・近心面への到達性に優れています。



下顎右側第二大臼歯の近心面

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#C8E2 レジン8カラー ■パープル
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#C8E2 レジン8カラー ■レッド
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

シクルスケーラー (鎌形)
Sickle Scalers



■ スケーラー

掲載画像 SM0/OOXE2



● モース 両頭 前歯用 0/00

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SM0/OOXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SM0/O09E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SM0/OOC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■パープル	



23

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SM239E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺

掲載画像 SB2/36



ボール 2/3

Ball 2/3

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SB2/36	5,600円	#6	サテンスチール	
SB2/3	5,200円	#2	角柄	

歯周外科時の肉芽除去などに適用です。



クレイン・カプラン 6

Crane-Kaplan 6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCK66	5,600円	#6	サテンスチール	

歯周外科時の肉芽除去などに適用です。

■ スケーラー ポピュラータイプ



ポピュラータイプ 1

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPSDE1	4,200円	#1	角柄	☺



ポピュラータイプ 2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPSDE2	4,200円	#1	角柄	☺




ポピュラータイプ 3

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPSDE3	4,200円	#1	角柄	☺

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー

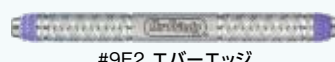

#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー ■パープル
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#6 サテンスチール



#1 角柄(片頭)

標準価格は全て税抜価格です。

Area-Specific Curettes

部位特定キュレット

特定の部位に適合するようデザインされています。


■ ビジョンカーベット (Vision Curvettes)

- ・50%短い湾曲したブレード
- ・5mmおよび10mmのシャンクマーク
- ・ハンドル上にカッティングエッジ識別マーク(+)



サブゼロ				Sub-0
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SGCSUB-06	5,600円	#6	サテンスチール	

長いシャンクが前歯部の深いポケットに届きます。

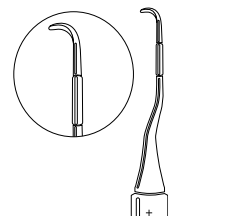

■ ハッチンソンキュレット (Hutchinson)



1/2				Hutchinson 1/2
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SHU1/2	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用

■ ハイジニストキュレット (Hygienist)



ハイジニストキュレット				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SHF-HYGE2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺

■ ファークーションキュレット (Furcation Curettes)

根面のへこみおよび根分岐部用。デマルコは前歯部舌側面のステイン除去にも適しています。



デマルコ 1				1 DeMarco
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDM16	6,200円	#6	サテンスチール	☺



デマルコ 2				2 DeMarco
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDM26	6,200円	#6	サテンスチール	☺

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#9E2 エバーエッジ



#6 サテンスチール



#2 角柄




取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Hoe Scalers Chisel Scalers

ホースケーラー チゼルスケーラー

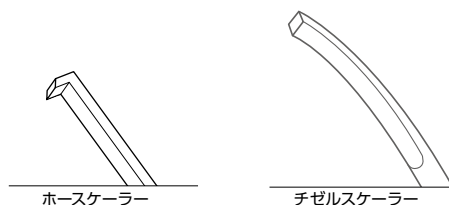

■ ホースケーラー

強固な歯石や付着物を砕いて、除去するのに使用します。プルストロークで使用します。



ターナー片頭 15 XS-15 Towner

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SXS156	5,600円	#6	サテンスチール	

前歯部舌側用



オーバン両頭 6/7 6/7 Orban

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SO6/76	5,600円	#6	サテンスチール	



オーバン両頭 8/9 8/9 Orban

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SO8/96	5,600円	#6	サテンスチール	

■ チゼルスケーラー

下顎前歯のブリッジ状の歯石を除去するのに使用します。プッシュストロークで使用します。



クッシング片頭 62 62 Cushing

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCU62	5,200円	#1	角柄	



ダービー・ペリー両頭 5K/6K 5K/6K Darby-Perry

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDP5/6K	5,200円	#2	角柄	



ダービー・ペリー両頭 9K/11K 9K/11K Darby-Perry

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDP9/11K	5,200円	#2	角柄	

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#6 サテンスチール(片頭)



#6 サテンスチール(両頭)



#1 角柄(片頭)



#2 角柄

File Scalers

ファイルスケーラー

■ ファイルスケーラー ハーシュフェルト

強固な歯石や付着物を砕いて、除去するのに使用します。プルストロックで使用します。



ハーシュフェルト 3/7				3/7 Hirschfeld
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FH3/76	5,600円	#6	サテンスチール	
頬舌側用				



ハーシュフェルト 5/11				5/11 Hirschfeld
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FH5/116	5,600円	#6	サテンスチール	
近遠心用				



ハーシュフェルト 9/10				9/10 Hirschfeld
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FH9/106	5,600円	#6	サテンスチール	
前歯用				

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

☑ 取寄品 取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ファイルスケーラー ダイヤモンドテック (Diamondtec™)

強固な歯石除去に使用します。多方向へのストロークが可能です。根分岐部(ファーケーション)や根面のへこみ部分のスケーリングに適したサイズと形です。


両頭ですので、効果的なスケーリングが行えます。太いハンドルは、人間工学的に握りやすいデザインで手根管症候群の症状緩和にも役立ちます。カラーリングにより、インスツルメントが識別しやすくなります。



ネイバース*



近遠心用*

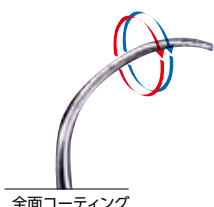

全面コーティング



ネイバース				Nabers
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDCN7	10,600 円	#7	サテンスチールカラー	



近遠心用				Mesial/Distal
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDCM/D7	10,600 円	#7	サテンスチールカラー	

※出典:
L・J・ガーワトスキー、D・B・マクフォール、D・スタック:歯科衛生士のための手根管症候群予防法。
歯科衛生学会誌、1992年2月

ハンドルの種類




#7 サテンスチールカラー

Scaler Accessories

スクレーラーアクセサリー

処置ごと・番手ごと・術者ごと等、様々な方法でインスツルメントを識別・管理できるシリコン製のアクセサリーです。

■ スクレーラーアクセサリー

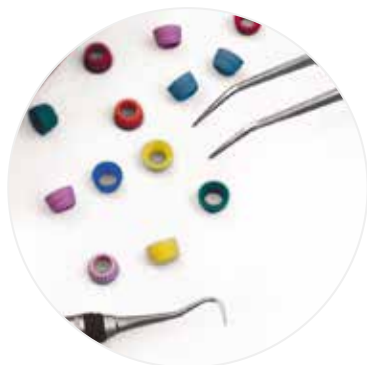

IMSシグネチャーグリップ レジン8カラー 16入 単色

ResinEight™ Colors Grips (16)

グリップ色	パートコード	標準価格	取寄品
● ブルー	SSGBLUE8	1,500円	
● グレー	SSGGRAY8	1,500円	
● グリーン	SSGGREEN8	1,500円	
● ラベンダー	SSGLAVNDR8	1,500円	
● オレンジ	SSGORANGE8	1,500円	
● パープル	SSGPURPLE8	1,500円	
● レッド	SSGREDE8	1,500円	
● イエロー	SSGYELLOW8	1,500円	

レジン8カラーハンドルと同色のグリップです。

※ハーモニーハンドルにはサイズが異なるため対応しておりません。

IMSシグネチャーグリップ アソート

Signature Series Grip - Assorted

数量	パートコード	標準価格	取寄品
16入	SSG0	1,500円	
80入	SSGMULTI	5,700円	🕒

シグネチャーグリップはサテンスチールカラー (Satin Steel Colours™)、レジン8カラー (Resin 8 Colours) およびエバーエッジ (Everedge™) ハンドル専用で、インスツルメントの識別および管理に使用します。カセット内で使用手順あるいは処理別にインスツルメントを配置するのに便利です。オートクレーブ滅菌に対応。

アソートには下記の8色が含まれます:

グレー、ピンク、ラベンダー、オレンジ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー

16入:上記8色×2個

80入:上記8色×10個

※ハーモニーハンドルにはサイズが異なるため対応しておりません。

IMSシグネチャーグリップ 16入 単色

Signature Series Grip

グリップ色	パートコード	標準価格	取寄品
● グレー	SSG1	1,500円	
○ ホワイト	SSG2	1,500円	
● オレンジ	SSG3	1,500円	
● ブラウン	SSG4	1,500円	
● イエロー	SSG5	1,500円	
● レッド	SSG6	1,500円	
● グリーン	SSG7	1,500円	
● ブルー	SSG8	1,500円	
● ブラック	SSG9	1,500円	
● ピンク	SSG10	1,500円	
● ラベンダー	SSG11	1,500円	
● オーシャンブルー	SSG12	1,500円	

シグネチャーグリップはサテンスチールカラー (Satin Steel Colours™)、レジン8カラー (Resin 8 Colours) およびエバーエッジ (Everedge™) ハンドル専用で、インスツルメントの識別および管理に使用します。カセット内で使用手順あるいは処理別にインスツルメントを配置するのに便利です。オートクレーブ滅菌に対応。

※ハーモニーハンドルにはサイズが異なるため対応しておりません。

IMSカラーコードリング

IMS™ Color Code Instrument Rings

リング色・数量	ラージ (太ハンドル用 #6、#7、#C8E2、#9E2、#XE2)	レギュラー (細ハンドル用 #2)	標準価格	取寄品
アソート 90入	IMS-1280L	IMS-1280	3,800円	
● グレー 50入	IMS-1281L	IMS-1281	2,100円	
○ ホワイト 50入	IMS-1282L	IMS-1282	2,100円	
● オレンジ 50入	IMS-1283L	IMS-1283	2,100円	
● ブラウン 50入	IMS-1284L	IMS-1284	2,100円	
● イエロー 50入	IMS-1285L	IMS-1285	2,100円	
● レッド 50入	IMS-1286L	IMS-1286	2,100円	
● グリーン 50入	IMS-1287L	IMS-1287	2,100円	
● ブルー 50入	IMS-1288L	IMS-1288	2,100円	
● ブラック 50入	IMS-1289L	IMS-1289	2,100円	
● ピンク 50入	IMS-12810L	IMS-12810	2,100円	
● ラベンダー 50入	IMS-12811L	IMS-12811	2,100円	

インスツルメントの識別や管理用のシリコンゴム製リング。カセット内で使用手順あるいは処理別にインスツルメントを配置するのに便利です。オートクレーブ滅菌対応。


アソートには下記の9色 (各10個) が含まれます:

グレー、ホワイト、オレンジ、ブラウン、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、ブラック

ラージ:φ6mm

レギュラー:φ3mm



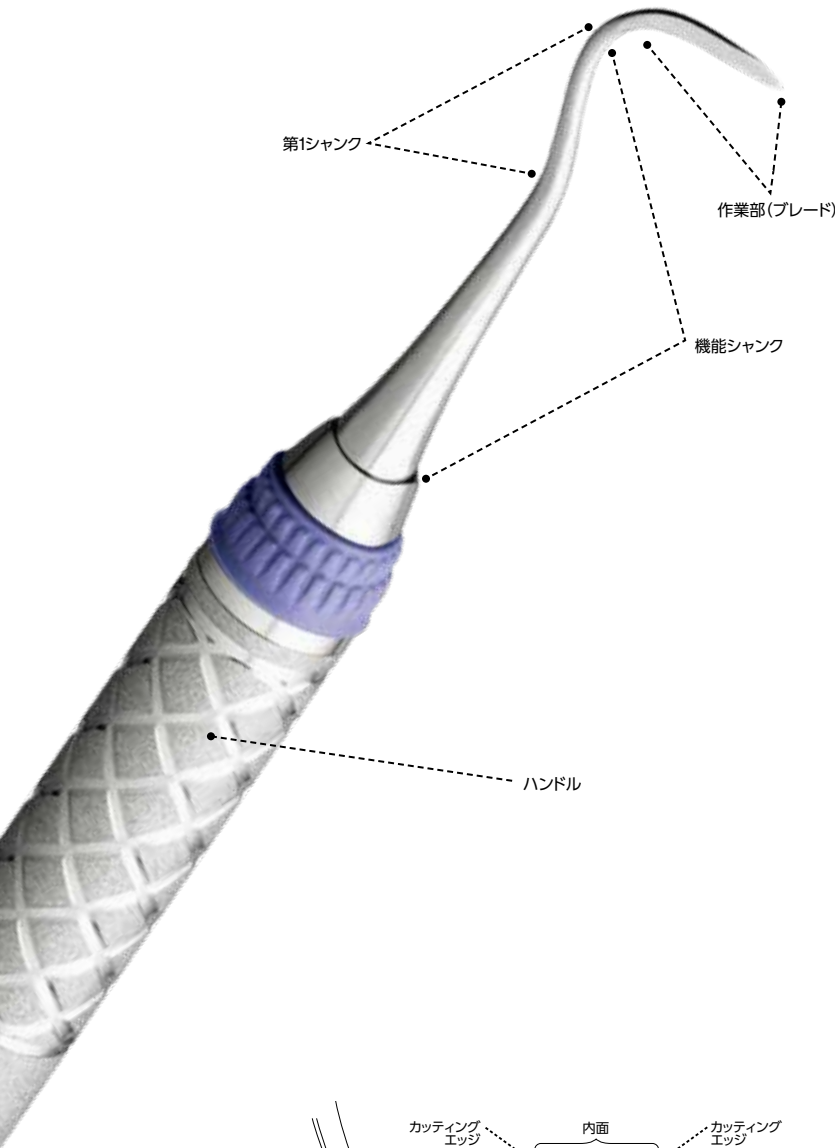

スケーラーとキュレット

すべての歯科用インスツルメントには、基本的なデザインの特徴があります。左の図は、スケーラーやキュレットのデザインの主な原則の概略を示しています。

インスツルメントを構成する3つの部位

1. ハンドル: インスツルメントを把持する部分
2. シャンク: ハンドルと作業部をつなぐ部分
3. 作業部: 実際に歯面にあたる部分

ハンドル

インスツルメントのハンドルには、様々な形やスタイルがあります。以下の要素を考慮してハンドルを選択することが大切です。

- 重量: 中空の軽量ハンドルは触感の伝達を向上させ、術者の疲労を軽減します。
- 直径: 太いハンドルは、コントロールがしやすく、軽い力で把持することができます。
- 滑り止め: ハンドル表面に付与された凸凹によって滑りにくく、操作性が向上します。

シャンク

第一シャンク (ターミナルシャンク)



作業部 (ブレード) とシャンクの第1屈曲部との間を第1シャンク (ターミナルシャンク) と呼びます。第1シャンクは、作業部を歯面に正しく適合させるために目印となる部位です。また、第1シャンクの長さは、歯肉縁上用と歯肉縁下用のインスツルメントによって異なります。

機能シャンク (ファンクショナルシャンク)

作業部 (ブレード) からハンドルまでの間を機能シャンク (ファンクショナルシャンク) と呼び、様々な長さのものがあります。長めの機能シャンクは、臼歯部や歯周ポケットの深い根面を処置する場合に必要です。短めの機能シャンクは、歯肉縁上の歯石除去や前歯部の処置に適しています。

作業部 (ブレード部)

作業部 (ブレード部) は内面、側面、背面、先端などの部分で構成されています。先端が丸いブレードはキュレットと分類されます。先端が尖ったブレードは、シックルスケーラーと分類されます。

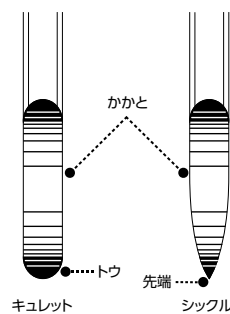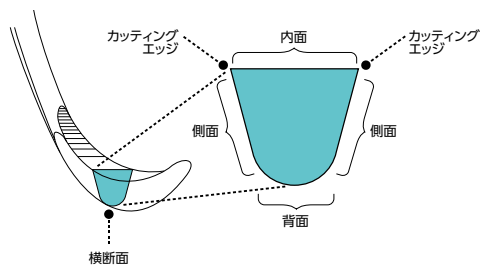

イラスト提供: J・S・ニールド: 歯科衛生インスツルメントの基礎、第二版: Lea & Febiger, 1988年。

インストルメントの使用に関連するシャンクの柔軟性

シャンク	使用するケース	例
柔軟なもの	<ul style="list-style-type: none"> ・歯肉縁下の歯石の探查 ・細かい歯石の除去 ・シャンクとハンドルを通して術者の指に感触を伝達 	<ul style="list-style-type: none"> ・グレーシーキュレットスタンダード ・エキスポローラー
中程度のもの	<ul style="list-style-type: none"> ・中程度または少量の歯石除去 ・中程度の歯石付着部の探查や除去に必要な良好な感触を伝達 	<ul style="list-style-type: none"> ・ユニバーサルキュレット
リジッド	<ul style="list-style-type: none"> ・強固な歯石除去 ・触感の伝達性が低いので、歯石の探查は困難 	<ul style="list-style-type: none"> ・シックルスケラー ・ペリオドンタルファイル ・グレーシーキュレットリジッド ・ホースケラー
エクストラリジッド	<ul style="list-style-type: none"> ・強固な歯石除去 ・触感の伝達性は極めて低い 	<ul style="list-style-type: none"> ・グレーシーキュレットエクストラリジッド


インストルメントのバランス

効果的に処置するためには、インストルメントはバランスが取れている必要があります。

バランスの取れたインストルメントは、ハンドルの長軸から2mm以内に作業部の中心があります。



バランスのとれたインストルメント

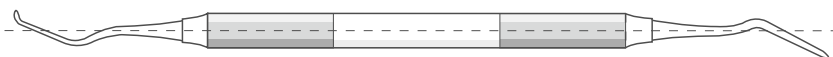

バランスのとれていないインストルメント

インストルメントの刻印


デザイン名と番号がハンドルの長軸に沿って表示されている場合、それぞれの番号は表示されている側に近い方の作業部を示しています。

デザイン名と番号がハンドルの周囲に表示されている場合には、最初の番号（左側）が上の作業部を、2番目の番号（右側）が下の作業部を示しています。



■ スケラー・キュレットに印字されているパートコードの読み方

スケラーの裏側に記載されているパートコードを読めば、オーダーが簡単です。

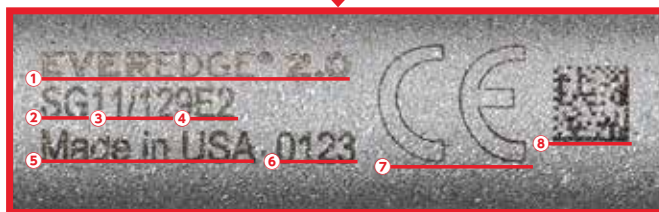

① **EVEREDGE™ 2.0** エバーエッジ2.0のロゴ

② **SG.....** スケラーの種類

例) グレーシー SG...オリジナル、SRPG SRP SP...アフターファイブ
SAS SS...ミニファイブ、SMS...マイクロミニファイブ
シックル SH...衛生士用、SCNEVI...ネビィ

③ **11/12.....** 番手

例) 1/2, 3/4, 5/6 (※F11/12=15/16, F13/14=17/18)

④ **9E2.....** ハンドル番号

例) XE2...ハーモニー、9E2...エバーエッジ、C8E2...レジン8カラー
7...サテンスチールカラー、6...サテンスチール
※2番ハンドル（角柄）の場合はハンドル番号は記載されていません。

⑤ **Made in USA** 原産国

⑥ **0123** 製造年月

⑦ **CE** 最初の2桁=月、後の2桁=年 例) 2023年1月生産分=0123

⑧ **QRコード** 欧州 (EU) 連合の基準適合マーク

原産国

製造年月

最初の2桁=月、後の2桁=年 例) 2023年1月生産分=0123

欧州 (EU) 連合の基準適合マーク

GTINコードと製造年月の情報