


# HuFriedyGroup Popular Surgical Collection

ヒューフレディ サージカルコレクション



Instrumentation and  
Procedural Products

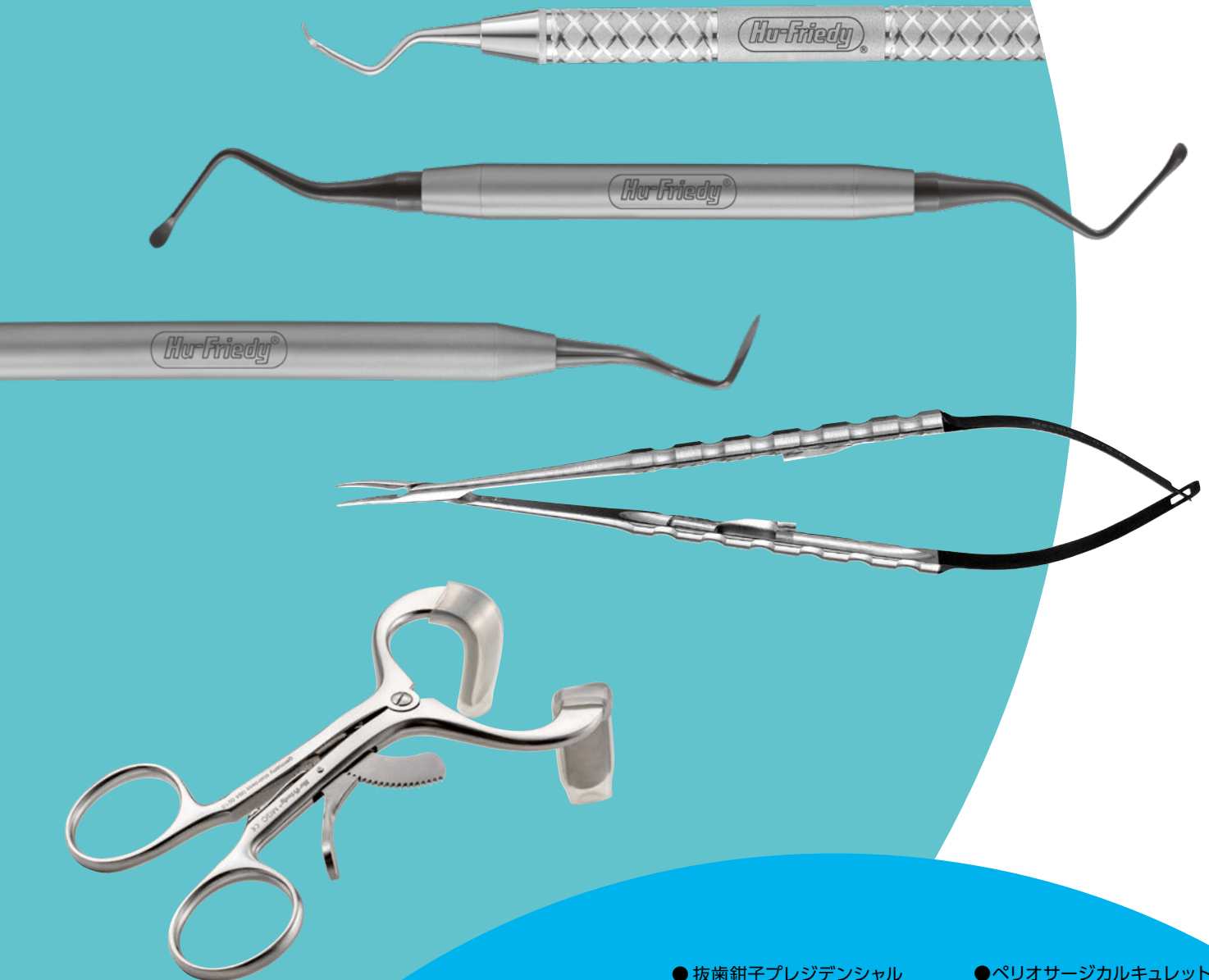

## 掲載製品

- 持針器
- はさみ
- IMSカセット
- ティッシュプライヤー
- 縫合用プライヤー
- 骨鉗子
- マウスギャグ (開口器)
- 抜歯鉗子プレジデンシャル
- IMS潤滑スプレー
- エレベーター (ヘーベル)
- アーカンサスストーン ベイツ5
- エレベーターバーナード
- ルクセーティングハイブリッド
- ルクセーティングエレベーター
- ペリオドンタルチゼル (のみ)
- ボーンブラガー
- 止血鉗子
- ペリオサージカルキュレット
- ボーンキュレット
- ファイル
- ペリオスチール
- ペリオトーム
- チークリトラクター
- ペリオドンタルナイフ
- トンネリングナイフ
- シリンジ
- スカルペルハンドル

持針器

マイクロカストロビージョシリーズ




マイクロ  
カストロビージョ  
スイスペリオ  
18cm  
SPNHDPVN 86,100円  
ヨーロッパハンドルより  
更に凸凹の少ない  
スムーズハンドル

6-0  
7-0  
8-0



マイクロ  
カストロビージョ  
直 DPV  
18cm  
NHDPV 86,100円  
ダイヤモンドダスト  
ヨーロッパハンドル

6-0  
7-0  
8-0

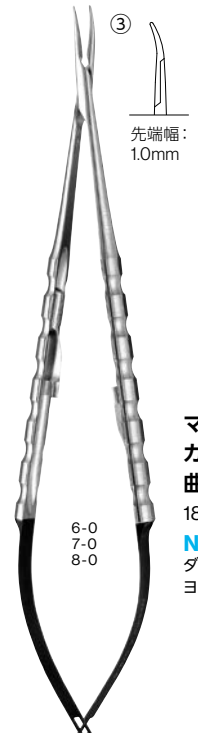

マイクロ  
カストロビージョ  
曲 DCPV  
18cm  
NHDCPV 86,100円  
ダイヤモンドダスト  
ヨーロッパハンドル

6-0  
7-0  
8-0



4-0, 5-0対応の  
マイクロ  
カストロビージョ

マイクロ  
カストロビージョ  
直 DPVN  
18cm  
NHDPVN 86,100円  
ダイヤモンドダスト  
ヨーロッパハンドル

4-0  
5-0  
6-0



4-0, 5-0対応の  
マイクロ  
カストロビージョ

マイクロ  
カストロビージョ  
曲 DCPVN  
18cm  
NHDCPVN 86,100円  
ダイヤモンドダスト  
ヨーロッパハンドル


4-0  
5-0  
6-0



マイクロ  
カストロビージョ直  
5026R  
18cm  
NHM-5026R 73,500円  
ダイヤモンドダスト  
ラウンドハンドル

6-0  
7-0  
8-0  
9-0

【先端の形状】

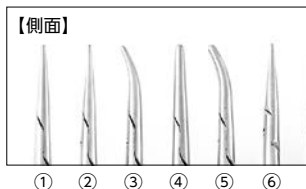

【ハンドルの形状】



上段：①、中段：②～⑤、下段：⑥・右頁⑦～⑩

持針器

NH5024(ラウンドハンドル)シリーズ



**カストロビージョ 直 5024R**  
18cm  
**NH5024R 80,900円**  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)  
ラウンドハンドル



**カストロビージョ 曲 5024RC**  
18cm  
**NH5024RC 80,900円**  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)  
ラウンドハンドル




**カストロビージョ コーテリニ 直 5024CORT**  
18cm  
**80,900円**  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)  
ラウンドハンドル  
NH5024Rより  
先端が細くなっています



**3-0、4-0の縫合針が把持できるカストロビージョ**  
8番抜歯後の縫合に  
おすすめ!

**カストロビージョ シミオン 直 ★**  
18cm  
**NH5024SIM 80,900円**  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)  
ラウンドハンドル  
従来のカストロビージョは5-0から細い縫合針が推奨となることが多いですが、カストロビージョシミオンは、NH5024Rより先端が太くしっかりしているので、3-0、4-0の縫合針が推奨となっています。  
推奨の縫合針のカストロビージョを使い分けることによって、それぞれのカストロビージョが長持ちします。

【NH5024(ラウンドハンドル)シリーズの作業部の比較】

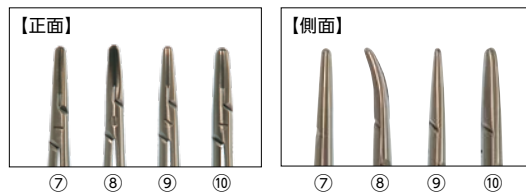

**基本のカストロ!**

**カストロビージョ 直 5020 ★**  
14cm  
**NH5020 78,800円**  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)




**基本のカストロ!**

**カストロビージョ 曲 5021 ★**  
14cm  
**NH5021 78,800円**  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)

**抜歯後の縫合が迅速に行える“はさみ付き持針器”**



**ダーフ 5032**  
11.5cm  
**NH5032 31,500円**  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)

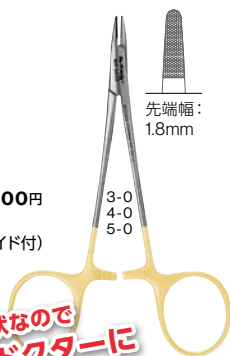

**コンパクトな形状なので手が小さなドクターにおすすめです**

**クワイルウッド5038 ★**  
15cm  
**NH5038 31,500円**  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)



**ヒューフレディ社で最も売れている持針器!**

**ギリーズ ファイン ★**  
15cm  
**NHGILFINE 31,500円**  
パーマシャープ(タングステンカーバイド付)  
●はさみが付いているので、縫合後に介助なしで、縫合糸をカットできます。  
●ロックがないので開閉が容易で、素早く縫合できます。  
●細い柄がしなるので、縫合針がしっかり把持できます。  
●人間工学的に3Dデザインされた把持部で、安定して把持しやすいです。

## はさみ

タングステンカーバイドが貼付されたパーマシャープ、ブラックライン、スタンダードなど、様々なラインナップがあります。



**マイクロ  
カストロビージョ  
曲 PV ★**  
ブラックライン  
18cm  
**SPVX 86,300円**  
スタンダード  
18cm  
**SPV 77,500円**



**ラグランジュ 曲 14 ★**  
11.5cm  
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)  
**S14SCX 27,300円**  
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)  
**S14 16,800円**



**アイリス 直 17**  
11.5cm  
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)  
**S17SCX 27,300円**  
スタンダード(ギザなし)  
**S17 14,700円**



**アイリス 曲 18 ★**  
11.5cm  
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)  
**S18SCX 27,300円**  
スタンダード(ギザなし)  
**S18 14,700円**



**ゴールドマン  
フォックス 曲 16**  
13.5cm  
隣接面での使用に適用  
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)  
**S16SCX 27,300円**  
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)  
**S16 16,800円**



**パーマシャープ  
ゴールドマン  
フォックス 曲  
5081**  
13cm  
ギザ付ブレード1枚  
隣接面での使用に適用  
**S5081 44,100円**



**パーマシャープ  
アイリス 直  
5082**  
11.5cm  
ギザなし  
**S5082 44,100円**



**パーマシャープ  
アイリス 曲  
5083**  
11.5cm  
ギザなし  
**S5083 44,100円**



**ヒューレディ  
13S**  
12cm  
先端が鉤状になっているので、  
ピンセットで引っ張らなくても、  
縫合糸がそのままカットできます。  
**S13S 16,800円**



**コーテリーニ 曲 ★**  
12cm  
ギザ付ブレード1枚  
「スーパーカット」シリーズのはさみのブレードは、  
一方は細やかなギザ付き、  
もう一方はかみそりの刃のような鋭い仕上げとなっており、  
すべりを防止しながら組織を切除できます。  
スーパーカット  
**SCORTSC 18,900円**

アシスタントの方にも人気者!  
臼歯部に届きやすい  
複屈曲型!

抜糸ばさみ

細かな部位への  
アクセスに最適な  
小さな作業部

## 感染管理 関連商品

### IMS カセット シグネチャー シリーズ (インストルメント・アクセサリは含まれません)

IMSカセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗浄剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。丈夫で手入れが簡単なステンレス製で、シリコン製のレールがインストルメントをしっかりと固定します。

**カストロビージョの収納におすすめ!**  
洗浄・滅菌時、破損を防止!



**US/HP用 L ★**  
外形寸法：76mm × 203mm × 32mm  
ハンドピース2~3本または  
超音波インサート5本が収納可能  
**IM60H8 ■ ブルー 12,600円**

**20本用**  
外形寸法：203mm × 280mm × 32mm  
20本のインストルメントが収納可能  
※ヒンジ用クリップは別売です  
**IM4208 ■ ブルー 20,800円**

**16本用**  
外形寸法：203mm × 280mm × 32mm  
16本のインストルメントと付属品が収納可能  
※ヒンジ用クリップは別売です  
**IM4168 ■ ブルー 20,800円**

**16本用カセットの空きスペースに  
マット&シリコンストッパーセットを入れて  
カストロビージョを収納できます!**



**交換用S US/HP用 L**  
マット&シリコンストッパーセット  
IMSカセット 16本用の空きスペースに  
おすすめです ※ケースは含まれません  
**IM60H8RAIL ■ ブルー 2,100円**

外科器具の  
管理におすすめ

メー  
ス  
入  
り  
防  
止



## ティッシュプライヤー・縫合用プライヤー

縫合時の歯肉や切開歯肉の保持・固定に使用します。パーマシャープ(TP5041, TP5042)は先端に超硬(タングステンカーバイド)が付与されており、より滑りにくなっています。



先端幅:0.6mm

ティッシュプライヤー  
マイクロ スイスペリオ  
アナトミカル  
18cm  
SPTPDSSPV  
58,800円  
有鉤




先端幅:0.5mm

ティッシュプライヤー  
マイクロ スイスペリオ  
18cm  
SPTPDAPV  
58,800円  
無鉤  
組織損傷を最小限に抑える  
先端デザイン




先端幅:0.6mm

マイクロ  
ダイヤモンドダスト DAPV  
直 無鉤 ★  
18cm  
TPDAPV  
58,800円

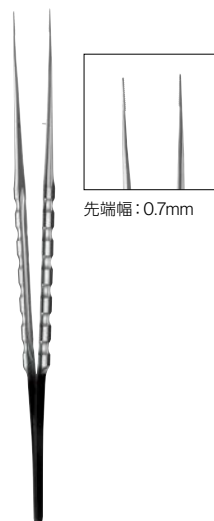

先端幅:0.7mm

マイクロ  
LCOSM  
直 マルチ ★  
18cm  
TPSLCOSM  
58,800円

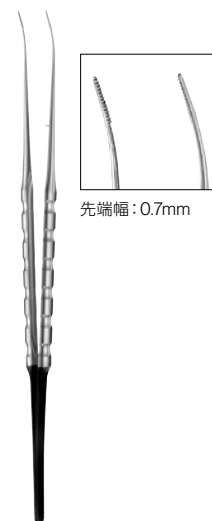

先端幅:0.7mm

マイクロ  
LCOCMN  
曲 マルチ  
18cm  
TPSLCOCMN  
58,800円



先端幅:1.4mm

アドソン 無鉤  
12cm  
5041 パーマシャープ  
TP5041 26,300円  
41 スタンダード  
TP41 10,800円



先端幅:1.4mm

アドソン 有鉤  
12cm  
5042 パーマシャープ  
TP5042 29,400円  
42 スタンダード  
TP42 10,800円



先端部の内径:1.2mm

縫合用  
プライヤー


コーン  
15cm  
SP20 13,500円



【縫合用プライヤー コーン使用中】  
縫合したい部位を把持したまま  
縫合できるので、縫合の際に生じる  
ズレを防止できます。

## 骨鉗子

歯槽骨のトリミング・骨整形・軟組織の除去に使用します。

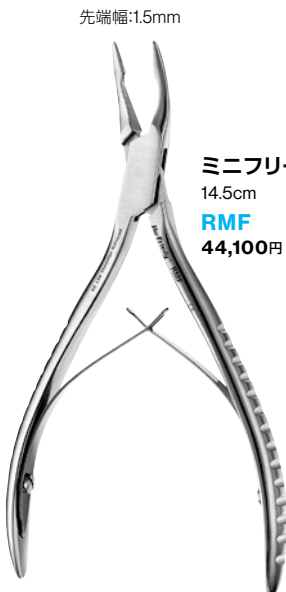

先端幅:1.5mm

ミニフリースマン ★  
14.5cm  
RMF  
44,100円



先端幅:2.0mm

ミニフリースマン  
90°  
14.5cm  
RMF90  
59,900円



先端幅:3.5mm

バイヤー  
ダブルアクション  
18cm  
RBEY  
68,200円

ダブルジョイントにより、  
軽い力で大きな切除力が  
得られます

## マウスギャグ (開口器)



**モルト**  
 小人用 ★ **MGC** 39,600円  
 幼児用 **MGI** 39,600円  
 ※欧米サイズのため日本人には一般成人の方でも“小人用”が適用です。


**一人でも容易に着脱可能!**  
 アシスタントさんがつかない時や訪問診療時など、一人で処置しなければならない時、容易に開閉・ロック解除ができる形状! スタッフ不足でも安心!

**しっかり・安定のホールド!**  
 噛む部分が広くしっかりホールドできるため、顎に不随意運動がある患者さんなどに特に有効! 柄に適度な長さがあるため、一度開口すれば安定した開口状態をキープ!

**「落ちない」「取れない」「壊れにくい」**  
 作業部にしっかりと装着されたシリコン製チップは、口腔内で落下してしまったり、着脱時に取れてしまう可能性が低く、患者さんが強い力で噛んでも壊れにくい頑丈設計!



マウスギャグの装着方法は  
 こちらからご覧いただけます

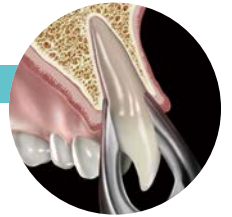

## 抜歯鉗子 プレジデンシャル

歯牙を抜去するために使用します。ヒューフレディ社製の抜歯鉗子プレジデンシャルシリーズは鍛造されたステンレス鋼を使用しているため耐久性が高く、インスツルメントに均等に圧力が加わるようにヒンジ部は精巧に製作され仕上げられています。ヒンジインスツルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。



**一般成人の方であれば、この4本で全顎対応**

**クライヤー ユニバーサル 150**  
 上顎前歯・小白歯  
**F150** 26,100円

**クライヤー ユニバーサル 151**  
 下顎前歯・小白歯  
**F151** 26,100円

**10S**  
 上顎大白歯  
**F10S** 26,100円

**ハリス 17**  
 下顎大白歯  
**F17** 26,100円

**スリムタイプの残根鉗子**

**ヒューフレディ 300 ★**  
 上顎残根 ギザ付  
**F300**  
 31,500円



**ヒューフレディ 301 ★**  
 下顎残根 ギザ付  
**F301**  
 31,500円



**ヒンジ製品の毎日のお手入れに...**



**鉗子の日々のお手入れに IMS潤滑スプレー 236ml**  
**ILS** 3,200円  
 IMS潤滑スプレー (ILS) はヒンジ部の動きをスムーズにします。



## エレベーター (ヘーベル)

**基本のヘーベル**

**スペシャルタイプ 1S ★**  
 4.3mm 直  
**EL4032**  
 9,500円

**スペシャルタイプ 3S**  
 2.8mm 直  
**EL3024**  
 9,500円

**スペシャルタイプ 4S ★**  
 2.5mm 直  
**EL4031**  
 9,500円


**スペシャルタイプ 1C ★**  
 4.2mm 曲  
**EL3042**  
 9,500円

**スペシャルタイプ 3C**  
 3.0mm 曲  
**EL4014**  
 9,500円


**スペシャルタイプ 4C ★**  
 2.5mm 曲  
**EL3092**  
 9,500円

**ヘーベル、ボーンキュレット、エキスカベーターのシャープニングにおすすめ**  
**ストーンの溝に沿わせてボーンキュレットやエレベーターが研げます**

**アーカンサスストーン ペイツ 5 ★**  
 中目(10×3.8×1.3cm)  
**SS5** 15,400円

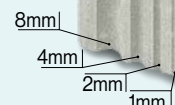

ヘーベルはストーンの溝にエッジがぴったり沿うよう少し傾けて、やさしくブッシュトロークします。  
 ※シャープニングオイルをご使用ください。

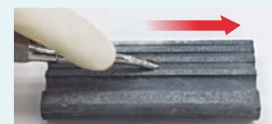

## エレベーター バーナード

薄いスパイア型の先端で、狭い歯根膜空隙にも挿入が可能なシンデモトームです。ペリオトームとしても、ルートチップエレベーターとしても使用できます。

歯周靭帯を  
切断しながら残根除去!!



ライト 6  
BL (ブラックライン)  
BER6X 12,100円



レフト 7  
BL (ブラックライン)  
BER7X 12,100円



11  
BL (ブラックライン)  
BER11X 12,100円

## ルクセーティングハイブリッド

薄く適正な角度に屈曲した先端部と太いハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに、抜歯時に歯周靭帯の切断ができ、頬側歯槽骨の保存を可能にします。ブラックラインもご用意がございます。



残根や破折した  
歯牙の抜去におすすめ



残根の除去には曲、遠心用S、  
近心用Sがあれば全顎対応可能です



曲 ★ 2.5mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSMCX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSMC 13,200円



遠心用 S ★ 2.3mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSM DX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSM D 13,200円



近心用 S ★ 2.3mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSM MX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSM M 13,200円



ブラックライン

サテンスチール

### キット

BL (ブラックライン) EPTKITX 115,500円  
#6 (サテンスチール) EPTKIT 107,800円

単品で4本以上ご購入をご検討の際は、  
キットがお得です!

ブラックラインキット(EPTKITX):左記7本  
(BL)、IMSカセット インフィニティ (単品定価  
20,000円)を含む

※ブラックラインキットには製品の特性上ストーンは  
含まれません。

サテンスチールキット(EPTKIT):左記7本  
(#6)、IMSカセット (単品定価 16,600円)、  
セラミックストーン円筒型 (単品定価 5,500  
円)を含む



直 スPEED 4.0mm直  
BL (ブラックライン)  
EPTSSPX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSSP 13,200円



直 2.5mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSMSX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSMS 13,200円



遠心用 L 4.0mm  
BL (ブラックライン)  
EPTLGDX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTLGD 13,200円



近心用 L 4.0mm  
BL (ブラックライン)  
EPTLGMX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTLGM 13,200円

## ルクセーティングエレベーター

ルクセーティングエレベーターは、歯周靭帯を切断するための薄くて鋭いブレードがついています。エレベーターのように「てこの原理」で使用するのではなく、揺らして歯根膜を切断しながら使用することで、隣接歯にかかる圧力を軽減します。

ブラックライン仕様!!  
術野がより見やすく、  
さらに切れ味が長持ちする  
高性能のブラックコーティングを施しています!



クサビ効果で  
侵襲の少ない  
抜歯が可能



2S 2mm直  
BL (ブラックライン)  
EL2SX 10,800円

3S 3mm直 ★  
BL (ブラックライン)  
EL3SX 10,800円

4S 4mm直  
BL (ブラックライン)  
EL4SX 10,800円

5S 5mm直 ★  
BL (ブラックライン)  
EL5SX 10,800円



2C 2mm曲  
BL (ブラックライン)  
EL2CX 10,800円



3C 3mm曲 ★  
BL (ブラックライン)  
EL3CX 10,800円



4C 4mm曲  
BL (ブラックライン)  
EL4CX 10,800円



5C 5mm曲 ★  
BL (ブラックライン)  
EL5CX 10,800円



## ペリオドンタルチゼル (のみ)



ブーザー 1/3

BL (ブラックライン) **PPBUSER13X** 12,400円  
 #6 (サテンスチール) **PPBUSE1/36** 11,000円



ロードス バック・アクション 36/37 ★

プルストロークで使用。歯牙に隣接した骨を外傷を引き起こすことなく除去。特に最後臼歯の遠心面での使用に有効。


#9 (エバーエッジ) **C36/379** 10,700円  
 #6 (サテンスチール) **C36/376** 9,400円



TG-O

プッシュストロークで使用。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。

#6 (サテンスチール) **CTG-O6** 9,600円  
 #2 (角柄) **CTG-O** 9,600円

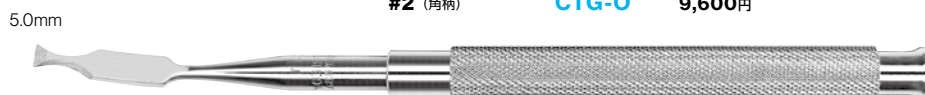

オッセンバイン 1

**CO1** 9,600円



オッセンバイン 2

**CO2** 9,600円



ペリオドンタルチゼル ブーザーは先端部背面がカーブしており、骨造成時の自家骨採取に適しています。



オッセンバインは骨の形態修正に適しています。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。フラップの引き起こしや二次口蓋フラップの除去にも使用できます。

## ボーンプラガー



グリスデイルを使用して充填中



ボーンプラガー グリスデイル

BL (ブラックライン) **PLGGR1X** 7,700円

## 止血鉗子

止血、小さな歯根の除去、不安定な器材の固定等様々な用途に対応可能。



ホルステッド・モスキート 曲 3  
12cm  
**H3** 10,300円



ホルステッド・モスキート 直 4  
12cm  
**H4** 10,300円



## ペリオサージカルキュレット

従来のグレーシー・ユニバーサルキュレットより、シャンク及びブレードが太くてしなりにくいので、強固に付着した沈着物を手早く除去できます。両刃タイプなので、1本で全顎対応です。シャープニングは歯周用のキュレットと同様に行えます。



プリチャード 1/2  
#9 (エパーエッジ) **SPR1/29** 6,600円

グレイマー・ネビズ 3 ★  
#9 (エパーエッジ) **SKRA39** 6,600円

フラップ時、不良肉芽や沈着物を素早く除去!

## ボーンキュレット (鋭匙)

多量の軟組織を容易に除去できるようにデザインされています。

ブレードタイプで不良肉芽をしっかり、素早く掻き取れる鋭匙



### ルーカスタイプ



ルーカス 86 ★  
BL (ブラックライン) **CL86X** 9,900円  
#6 (サテンスチール) **CL866** 8,800円



ルーカス 84  
BL (ブラックライン) **CL84X** 9,900円  
#6 (サテンスチール) **CL846** 8,800円



ルーカス 87  
BL (ブラックライン) **CL87X** 9,900円  
#6 (サテンスチール) **CL876** 8,800円

### ミラータイプ




ミラー 9  
#6 (サテンスチール) **CM96** 8,800円  
#522 (角柄) **CM9** 8,800円



ミラー 10 ★  
#6 (サテンスチール) **CM106** 8,800円  
#522 (角柄) **CM10** 8,800円



ミラー 11  
#6 (サテンスチール) **CM116** 8,800円  
#522 (角柄) **CM11** 8,800円

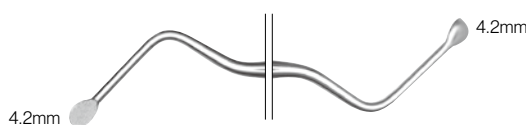

ミラー 12  
#6 (サテンスチール) **CM126** 8,800円  
#522 (角柄) **CM12** 8,800円

## ファイル (やすり)


全方向に切削力を加えられるクロスカット!



ボーンファイル ミラーコルバーン 1X #6 (サテンスチール) **BF1X6** 14,400円



ペリオドンタルファイル シューガーマン 1S/2S  
近遠心用 (刃:2面)  
#6 (サテンスチール) **FS1/2S6** 10,800円

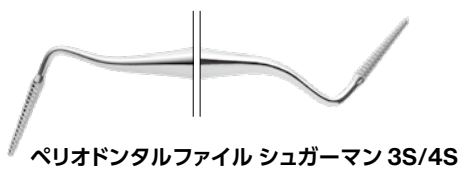

ペリオドンタルファイル シューガーマン 3S/4S  
頬舌用 (刃:3面)  
骨縁上および骨縁下ポケット内の肉芽組織の除去に適しています。  
#6 (サテンスチール) **FS3/4S6** 10,800円




シューガーマン3S/4S使用中



## ペリオスチール (骨膜剥離子)

組織の把持・保護・排除する際に使用します。一般的な外科処置に際し、術中に生じる偶発的な損傷を軽減するため、また組織を保護するために使用します。

ビューフレディ社で  
最も売れている  
剥離子!

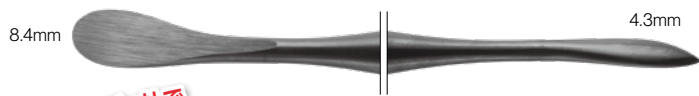


**モルト9 ★**  
BL (ブラックライン) **P9X** 10,800円  
#6 (サテンスチール) **P96** 9,600円  
#522 (角柄) **P9** 9,600円



**ブーザー ★**  
BL (ブラックライン) **PPBUSERX** 10,800円  
#6 (サテンスチール) **PPBUSER6** 9,600円




**ゴールドマンフォックス 14**  
BL (ブラックライン) **P14X** 10,800円  
#6 (サテンスチール) **P146** 9,600円  
#2 (角柄) **P14** 9,600円

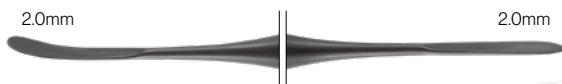

**アレン 前歯用 ★**  
BL (ブラックライン) **PPAELAX** 14,400円

歯間乳頭など  
繊細な剥離に  
おすすめ

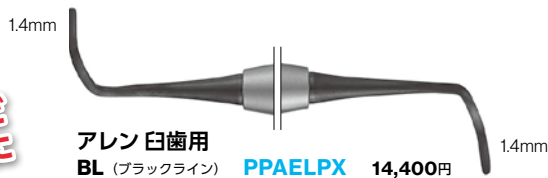

**アレン 白歯用**  
BL (ブラックライン) **PPAELPX** 14,400円



**プリチャード PR3**  
BL (ブラックライン) **PPR3X** 10,800円  
#6 (サテンスチール) **PPR36** 9,600円




**ハーシュフェルト 20**  
#6 (サテンスチール) **P206** 9,600円  
#2 (角柄) **P20** 9,600円



1本で歯肉の剥離と排除が可能  
ブラックラインは歯肉排除時に乱反射を抑制し、  
より良好な術野を確保!!


**ラバンカ 改良型3 ★**  
BL (ブラックライン) **PPLABANC3X** 15,600円  
#6 (サテンスチール) **PPLABANC36** 14,400円

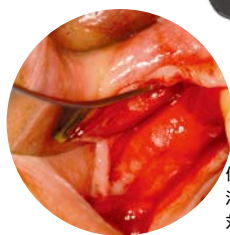



使いやすい小サイズの剥離子と、  
滑りにくいギザ付きリトラクターが  
対になっています。

## ペリオトーム (歯周靭帯刀)

薄く鋭利な刃で歯周靭帯を切断することで、  
周囲の歯槽骨への損傷を抑えながら抜歯を容易にします。

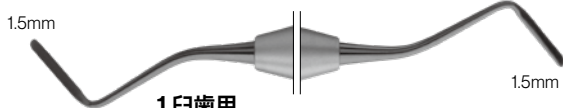

**1 白歯用**  
BL (ブラックライン) **PT1X** 7,500円  
#6 (サテンスチール) **PT1** 7,000円

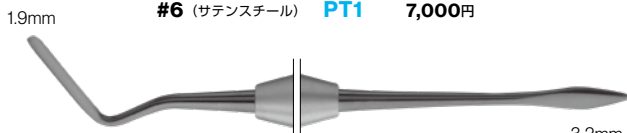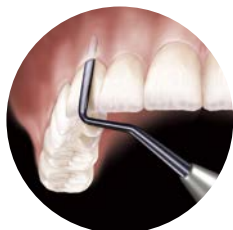

**2 前歯用**  
BL (ブラックライン) **PT2X** 7,500円  
#6 (サテンスチール) **PT2** 7,000円

## チークリトラクター

ブラックラインは乱反射を抑制し、  
より良好な術野を確保します!



**ミネソタ大学型 ★**  
BL (ブラックライン) **CRMX** 5,800円  
(従来品) **CRM** 5,800円


## ペリオドンタルナイフ・トンネリングナイフ

切開や歯肉の豊隆形成や歯間部歯肉組織の切除に使用されます。




**オルバン(型)ナイフ**

**オーバン1/2 ★** 角度のついたブレードと複屈曲のシャंकで臼歯部に適用。隣接歯間部歯肉の切除にも使用。  
**BL** (ブラックライン) **KO1/2X** 15,900円 **#6** (サテンスチール) **KO1/26** 12,300円  
**#9** (エバーエッジ) **KO1/29** 13,800円

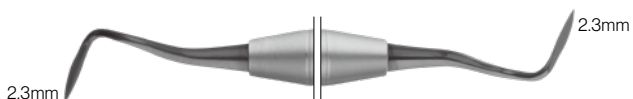


**オーバン アレン改良型 1/2**  
 KO1/2に比べ30%薄いデザイン。垂直のおよび水平的方向への骨膜上粘膜を切除。丸みを帯びた先端部により穿孔のリスクが低減。  
**BL** (ブラックライン) **KO12KPO3AX** 15,900円

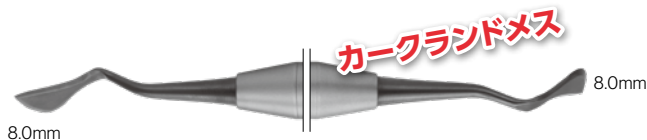

**カークランドメス**

**カークランド 15/16**  
 歯肉除去や歯肉整形時の第一次斜切開用。特に臼歯部に適用。  
**BL** (ブラックライン) **KK15/16X** 15,900円  
**#9** (エバーエッジ) **KK15/169** 13,800円  
**#6** (サテンスチール) **KK15/166** 12,300円

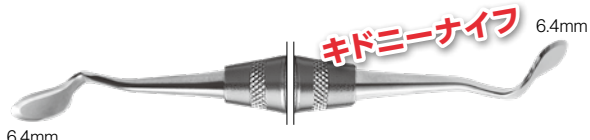


**キドニーナイフ**

**ゴールドマンフォックス 7**  
 ヘビーシャंकタイプ - 長斜切開に適したブレード角度。楕円形のブレードなので臼歯部に適用。  
**#6** (サテンスチール) **KGF76** 12,300円




**スピアーナイフ**

**ゴールドマンフォックス 11**  
 槍型(スピア)ポイント  
 臼歯部に適合しやすいブレード角度。  
**#6** (サテンスチール) **KGF116** 12,300円

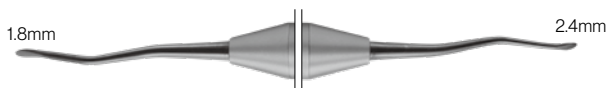

**トンネリングナイフ 1**  
**BL** (ブラックライン) **TKN1X** 12,800円

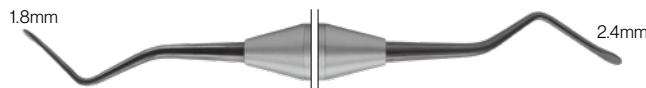

**トンネリングナイフ 2**  
 1.8mm/2.4mm  
**BL** (ブラックライン) **TKN2X** 12,800円

## シリンジ



**サイナスリフト時の骨補填におすすめ!!**



**ボーングラフトシリンジ 7mm**  
 内径 5.8mm。  
 目詰まりを防ぐため、先端から充填します。  
**SYBG** 26,400円

## スカルペルハンドル (メスハンドル)

**歯頸部に沿った切開がしやすいペンタイプメスハンドル**



**ヨーロッパスタイル 5E ★** バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。また、シンプルなデザインのグリップで、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易です。  
**10-130-05E** 11,700円



**5** バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。  
**10-130-05** 11,700円




**5A** **10-130-05A** 11,700円




**ミニブレード用 ★ SHDPV** 28,600円

**マイクロブレード用**

### ハンドルの種類

**BL** (ブラックライン)   
**#9** (エバーエッジ) 

**#6** (サテンスチール)   
**#2** (角柄) 

# ヒューフレディ サージカルコレクション 注文書

	製品名	パートコード	標準価格(税別)	数量	
持針器	マイクロカastroピージョ	スイスベリオ	SPNHDPVN	86,100円	
		直DPV	NHDPV	86,100円	
		曲DCPV	NHDCPV	86,100円	
		直DPVN	NHDPVN	86,100円	
		曲DCPVN	NHDCPVN	86,100円	
		直5026R	NHM-5026R	73,500円	
	カastroピージョ	直5024R	NH5024R	80,900円	
		曲5024RC	NH5024RC	80,900円	
		コーテリニ直	NH5024CORT	80,900円	
		シミオン直	NH5024SIM	80,900円	
		直5020	NH5020	78,800円	
		曲5021	NH5021	78,800円	
	ダーフ5032	NH5032	31,500円		
	クワイルウッド5038	NH5038	31,500円		
ギリーズファイン	NHGILFINE	31,500円			
はさみ	ラグランジュ曲14	BL	S14SCX	27,300円	
		スタンダード	S14	16,800円	
	アイリス直17	BL	S17SCX	27,300円	
		スタンダード	S17	14,700円	
	アイリス曲18	BL	S18SCX	27,300円	
		スタンダード	S18	14,700円	
	ゴールドマンフォックス曲16	BL	S16SCX	27,300円	
		スタンダード	S16	16,800円	
	パーマシャープ	ゴールドマンフォックス曲5081	S5082	44,100円	
		アイリス直5082	S5083	44,100円	
	マイクロカastroピージョ曲PV	BL	SPVX	86,300円	
		スタンダード	SPV	77,500円	
	縫合用ヒューフレディ13S	S13S	16,800円		
	コーテリニ直スーパーカット	SCORTSC	18,900円		
IMSカセットシグネチャー	US/HP用Lブルー	IM60H8	12,600円		
	20本用ブルー	IM4208	20,800円		
	16本用ブルー	IM4168	20,800円		
	交換用SUS/HP用L	IM60H8RAIL	2,100円		
ブライヤー	マイクロスイスベリオアナトマル	SPTPDSSPV	58,800円		
	マイクロスイスベリオ	SPTPDAPV	58,800円		
	マイクロダイヤモンドダストDAPV直無鉤	TPDAPV	58,800円		
	マイクロLCOSM直マルチ	TPSLCOSM	58,800円		
	マイクロLCOCMN曲マルチ	TPSLCOCMN	58,800円		
	アドソン無鉤	TP5041	26,300円		
	41スタンダード	TP41	10,800円		
	5042パーマシャープ	TP5042	29,400円		
	アドソン有鉤	TP42	10,800円		
	42スタンダード	TP42	10,800円		
縫合用ブライヤー	コーン	SP20	13,500円		
骨鉗子	ミニフリードマン	RMF	44,100円		
	90°	RMF90	59,900円		
バイヤーダブルアクション	RBEY	68,200円			
マウスギヤ(開口器)	小人用	MGC	39,600円		
	幼児用	MGI	39,600円		
抜歯鉗子	クライヤーユニバーサル	150	F150	26,100円	
		151	F151	26,100円	
	10S	F10S	26,100円		
	ハリス17	F17	26,100円		
	ヒューフレディ	300	F300	31,500円	
301	F301	31,500円			
IMS潤滑スプレー	236ml	ILS	3,200円		
エレベーター スペシャルタイプ	1S	EL4032	9,500円		
	1C	EL3042	9,500円		
	3S	EL3024	9,500円		
	3C	EL4014	9,500円		
	4S	EL4031	9,500円		
4C	EL3092	9,500円			
アーカンサスストーンベイツ5	SS5	15,400円			
エレベーター バーナード	ライト6	BL	BER6X	12,100円	
	レフト7	BL	BER7X	12,100円	
11	BL	BER11X	12,100円		
ルクセーティング ハイブリッド	曲	BL	EPTSMCX	14,300円	
		#6	EPTSMC	13,200円	
	遠心用S	BL	EPTSMDX	14,300円	
		#6	EPTSM	13,200円	
	近心用S	BL	EPTSMMX	14,300円	
		#6	EPTSM	13,200円	
	直スベード	BL	EPTSSPX	14,300円	
		#6	EPTSSP	13,200円	
	直	BL	EPTSMX	14,300円	
		#6	EPTSMS	13,200円	
	遠心用L	BL	EPTLGDX	14,300円	
		#6	EPTLG	13,200円	
	近心用L	BL	EPTLGMX	14,300円	
		#6	EPTLGM	13,200円	
	キット	BL	EPTKITX	115,500円	
	ルクセーティング エレベーター	2S	BL	EL2SX	10,800円
		2C	BL	EL2CX	10,800円

	製品名	パートコード	標準価格(税別)	数量	
ルクセーティング エレベーター		3S	BL	EL3SX	10,800円
		3C	BL	EL3CX	10,800円
		4S	BL	EL4SX	10,800円
		4C	BL	EL4CX	10,800円
		5S	BL	EL5SX	10,800円
		5C	BL	EL5CX	10,800円
ペリオドンタル チゼル	ブーザー1/3	BL	PPBUSER13X	12,400円	
		#6	PPBUSE1/36	11,000円	
	ロードスバック・アクション 36/37	#9	C36/379	10,700円	
		#6	C36/376	9,400円	
	TG-O	#6	CTG-O6	9,600円	
		#2	CTG-O	9,600円	
オッセンバイン1	CO1		9,600円		
	オッセンバイン2	CO2		9,600円	
ボーンブラッカー クリスタル	BL	PLGGRIX	7,700円		
止血鉗子	ホルステッド・ モスキート	曲3	H3	10,300円	
	直4	H4		10,300円	
ペリオサージカル キュレット	プリチャード1/2	#9	SPR1/29	6,600円	
	クレイマー・ネビンズ3	#9	SKRA39	6,600円	
ルークス ミラー	86	BL	CL86X	9,900円	
		#6	CL866	8,800円	
		BL	CL84X	9,900円	
		#6	CL846	8,800円	
		BL	CL87X	9,900円	
		#6	CL876	8,800円	
	9	#6	CM96	8,800円	
		#522	CM9	8,800円	
		10	#6	CM106	8,800円
			#522	CM10	8,800円
		11	#6	CM116	8,800円
			#522	CM11	8,800円
12	#6	CM126	8,800円		
	#522	CM12	8,800円		
ファイル	ボーンファイルミラーコルバーン	1X	#6	BF1X6	14,400円
	ペリオドンタルファイル シュガーマン	1S/2S	#6	FS1/2S6	10,800円
モルト9	3S/4S	#6	FS3/4S6	10,800円	
	BL	P9X		10,800円	
ブーザー	#6	P96		9,600円	
	#522	P9		9,600円	
ペリオオスチール	ブーザー	BL	PPBUSERX	10,800円	
	#6	PPBUSER6		9,600円	
ゴールドマンフォックス14	BL	P14X		10,800円	
	#6	P146		9,600円	
アレン前歯用	BL	PPAELAX		14,400円	
アレン白歯用	BL	PPAELPX		14,400円	
プリチャードPR3	BL	PPR3X		10,800円	
ハーシェフェルト20	#6	PPR36		9,600円	
	#2	P206		9,600円	
ラバンカ改良型3	#6	P20		9,600円	
	BL	PPLABANC3X		15,600円	
ペリオトーム	#6	PPLABANC36		14,400円	
	1白歯用	BL	PT1X	7,500円	
チークリトラクター	#6	PT1		7,000円	
	2前歯用	BL	PT2X	7,500円	
ペリオドンタル ナイフ	#6	PT2		7,000円	
	BL	PT2		7,000円	
トンネリグナイフ	1	BL	CRMX	5,800円	
	2	BL	CRM	5,800円	
シリンジ	10-130-05E	BL	KO1/2X	15,900円	
	5	#9	KO1/29	13,800円	
ハンドル	5A	#6	KO1/26	12,300円	
	ミニブレード用	BL	KO12KPO3AX	15,900円	
スカル ハンドル	10-130-05E	BL	KK15/16X	15,900円	
	5	#9	KK15/169	13,800円	
スカル ハンドル	5A	#6	KK15/166	13,800円	
	ミニブレード用	#6	KG76	12,300円	
スカル ハンドル	10-130-05E	#6	KG76	12,300円	
	5	BL	TKN1X	12,800円	
スカル ハンドル	5A	BL	TKN2X	12,800円	
	ミニブレード用	BL	TKN2X	12,800円	
スカル ハンドル	10-130-05E	SYBG		26,400円	
	5	BL	YO130-05E	11,700円	
スカル ハンドル	5A	BL	YO130-05	11,700円	
	ミニブレード用	BL	YO130-05A	11,700円	
スカル ハンドル	10-130-05E	SHDPV		28,600円	
	5	BL	SHDPV	28,600円	

掲載商品の標準価格は2024年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

【販売名/一般的な名称/医療機器届出番号】 持針器/持針器/13B3X10195G16101、はさみ 歯肉用/歯科用歯肉はさみ/13B3X10195G19101、はさみ/はさみ/13B3X10195G41101、ディッシュブライヤー/歯科治療用ピンセット/13B3X10195G20101、縫合用ブライヤー/歯科治療用ピンセット/13B3X10195G20102、骨鉗子/手術用骨鉗子/13B3X10195G28102、マウスギヤ/歯科用開口器/13B3X10195G30103、抜歯鉗子/抜歯用鉗子/13B3X10195G08101、エレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03101、ルクセーティングハイブリッド/歯科用エレベーター/13B3X10195G03104、ルクセーティングエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03103、ペリオドンタルチゼル/歯科用エキスカベーター/13B3X10195G04102、ボーンブラッカー/歯科用インプラント手術器具/13B3X10195G09103、止血鉗子/鉗子/13B3X10195G4103、ペリオサージカルキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G06102、ボーンキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G06101、ボーンファイル/やすり/13B3X10195G24102、ペリオドンタルファイル/やすり/13B3X10195G24101、ペリオオスチール/歯科用起子及び剥離子/13B3X10195G13101、ペリオトーム/剝離切開刀/13B3X10195G36101、チークリトラクター/歯科用開口器/13B3X10195G30102、ペリオドンタルナイフ/歯肉切除メス/13B3X10195G15102、トンネリグナイフ/歯肉切除メス/13B3X10195G15101、ボーンブラフトシリンジ、歯科用インプラント手術器具/13B3X10195G09103、スカルハンドル/ナイフハンドル/13B3X10195G32101  
【商標について】 以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: HU-FRIEDY  
●医療機器の分類: 一般医療機器 (クラスI)

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

<p>■ 歯科医院名</p> <p>■ お名前</p> <p>■ ご住所 〒 -</p> <p>TEL - -</p>	<p>【歯科商店名】</p>
---	----------------