



# TITANIUM IMPLANT SCALERS

インプラントスケーラー チタン

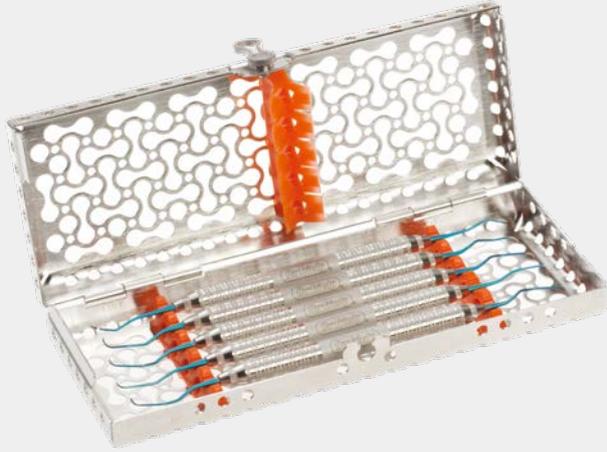

より良いインプラント治療につながる、チタン製インプラントスケーラー！  
インプラントやアバットメントと同じ金属を使用したスケーラーは、  
インプラントのメンテナンス・デブリッドメント・バイオフィルム除去用に  
特化した設計・加工が施され、デザインにより歯肉縁上及び歯肉縁下の  
いずれにも使用できます。

- **視認性の向上**: 通常のスケーラーとの違いを一目で識別できる  
ティール色陽極酸化チタンを採用
- **シャープな切れ味を実現**: 陽極酸化処理後に精巧に研磨し鋭利に  
仕上げたカッティングエッジ
- **シャープニング可能**: シャープニングを行うことで、シャープさを復元  
することが可能 (チタンスケーラーにのみ使用するストーンをご準備いただくことを推奨)
- **機能を強化**: 歯石やバイオフィルムの除去などインプラントの  
メンテナンスが可能
- **人間工学的な使いやすさに配慮**: 太めでウォーターウェーブ柄のため、  
しっかりと把持出来るサテンスチールハンドルを採用

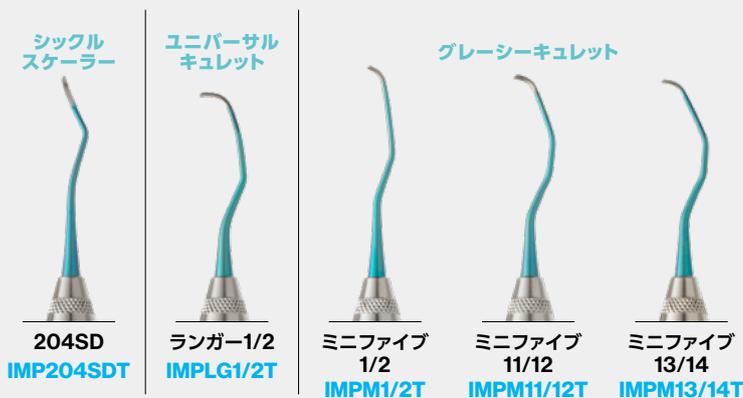

標準価格：9,800円 (税別)

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2025年1月21日現在のものです。  
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り  
作部品の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤  
差が生じることがあります。■販売名/一般的名称/医療機器届出番号 ■インプラントスケーラー/歯科用スケーラー/13B3X10195G02107  
●医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI) 【商標について】 以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: Hu-Friedy ©2025  
Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. N2670J/2501



**HuFriedyGroup**  
The Best In Practice