

ヒューフレディ

矯正 コレクション

HuFriedyGroup

Orthodontic Products

 **HuFriedyGroup**



ヒューフレディグループ製品の特徴

ヒューフレディグループ製品の最大の特徴は製品寿命の長さです。

- ハンドルから先端まで100%高品質のステンレスを使用して製造されています。
- 30段階以上の製造工程でカッターやプライヤー類を職人が1つ1つ丁寧にハンドメイドで仕上げます。
- コンパクトで強度のあるデザイン、精密な仕上げ、優れたホールド感と操作性を誇っています。
- 厳しい品質検査に合格した製品のみを販売しています。

Production of Precision 厳密な生産

ひとつの製品を仕上げる為、ヒューフレディグループ製矯正製品は30種類以上の工程が施されます。

Immunity Steel® Alloy イミュニティスチール

ヒューフレディグループが独自の製法で開発したイミュニティスチールは、クロムとカーボンを主成分とする合金の鍛造仕上げなので耐久性が強く、オートクレーブにも対応しています。

Orbit Joint オービットジョイント

刃の先端のズレやジョイントのがたつきがなく、スムーズなカッティングアクションが持続する特殊製法です。

※定期的にジョイント部に潤滑剤を挿してください。

Laser Engraving レーザー刻印

カッター・フォーミングプライヤーにはワイヤーの許容径が記載されています。

Satin Finish サテンフィニッシュ

ヒューフレディグループの矯正器具は、100%硬質ステンレススチールでサテン仕上げを施しており、高い耐腐食性があり器具を美しく保ちます。

Ergonomic Design 人間工学に基づいたデザイン

快適性と信頼性を考慮したサイズ、形状、ハンドルの長さ、および重量デザインです。

【医療機器届出番号】 *1 販売名:プライヤー 医療機器届出番号:13B3X10195G12101 一般的名称:歯科矯正用プライヤー / *2 販売名:プライヤー(緩衝材付) 医療機器届出番号:13B3X10195G12102 一般的名称:歯科矯正用プライヤー / *3 販売名:持針器 医療機器届出番号:13B3X10195G16101 一般的名称:持針器 / *4 販売名:ディレクター 医療機器届出番号:13B3X10195G35101 一般的名称:歯科矯正用結さつ器 / *5 販売名:バンドプッシャー 医療機器届出番号:13B3X10195G29101 一般的名称:歯科矯正用バンドプッシャー / *6 販売名:はさみ 金冠用 医療機器届出番号:13B3X10195G44101 一般的名称:歯科用金冠はさみ / *7 販売名:リンガルプライヤー 医療機器届出番号:13B3X10195G12103 一般的名称:歯科矯正用プライヤー / *8 販売名:スケーラー 医療機器届出番号:13B3X10195G02101 一般的名称:歯科用スケーラ / *9 販売名:止血鉗子 医療機器届出番号:13B3X10195G43103 一般的名称:鉗子 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)

クリアコレクション Clear Collection 4-5

678-800	クリアコレクション ティアドロップブライヤー	*1
678-801	クリアコレクション パーティカルブライヤー	*1
678-802	クリアコレクション ホリゾンタルブライヤー	*1
678-803	クリアコレクション ホールパンチブライヤー	*1
678-804	クリアコレクション スポットブライヤー	*1
678-805	クリアコレクション ペティートパンチブライヤー	*1
678-807	クリアコレクション カンタークロックワイズウェッジブライヤー	*1
678-808	クリアコレクション クロックワイズウェッジブライヤー	*1
678-809	クリアコレクション バイトプレーンブライヤー	*1
678-810	クリアコレクション ブーツトラップブライヤー	*1
678-811	クリアコレクション イレイサーブライヤー	*1
678-812	クリアコレクション プレシジョンアライナーパンチブライヤー	*1
678-813	クリアコレクション マルチパンチブライヤー	*1

スリムコレクション Slim Collection 6-8

678-113	スリムディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド	*2
678-013	交換用シリコンインサート 678-113用 (3個入)	
678-500	スリムマイクロカッター	*1
678-501	ウルTRASリムワインガルトブライヤー	*1
678-502	スリムハンマーヘッドNiTiブライヤー	*1
678-503	スリムバンドリム-ピンングブライヤー	*2
678-014	交換用パッド1/4 678-207/208/503用 (6個入)	
678-036	交換用パッド3/16 678-207/208/503用 (6個入)	
678-504	スリムダイレクトボンドブラケットツイーザー	*1
678-505	ウルTRASリムバックルチューブボンダーツイーザー	*1
678-506	スリムディスタルシンチバックハンドインストルメント	*4

リングルコレクション Lingual Collection 9-10

678-709	リングル ディボンディングブライヤー	*1
678-700	リングル ディスタルエンドカッター	*7
678-701	リングル ピン&リガチャーカッター	*7
678-702	リングル ワインガルトブライヤー	*7
678-702-90	リングル ワインガルトブライヤー 90°	*7
678-703	リングル ブラケットリム-ピンングブライヤー	*7
678-704	リングル ハンマーヘッドNiTiブライヤー	*7
678-704SER	リングル ハンマーヘッドNiTiブライヤーギザ付	*7
678-705	リングル マッシュブライヤー	*7

カッター Cutters 11

678-101	ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド	*1
678-101L	ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド ロング	*1
678-102	ディスタルエンドカッターフラッシュカット	*1
678-103	ハードワイヤーカッター 15°	*1
678-104	ハードワイヤーカッター 直	*1
678-105	ピン&リガチャーカッター	*1
678-106	ミニピン&リガチャーカッター	*1
678-107	マイクロミニピン&リガチャーカッター	*1
678-107L	マイクロミニピン&リガチャーカッター ロング	*1
678-109	マイクロミニピン&リガチャーカッター 15°	*1
678-110	マイクロカッター	*1
678-111	ディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド	*2
678-011	交換用シリコンインサート 678-111用 (3個入)	

ユーティリティブライヤー Utility Pliers 12-13

678-201	ワインガルトブライヤー	*1
678-201L	ワインガルトブライヤー ロング	*1
678-202	スリムワインガルトブライヤー	*1
678-203	ホープブライヤー 直	*1
678-204	ホープブライヤー オフセット	*1
678-205	バンドシーティングブライヤー	*1
678-206	アドヒューシブルム-ピンングブライヤー	*2
678-014A	交換用パッド1/4 678-206用 (6個入)	
678-001	交換用ブレード 678-206用 (1本入)	
678-207	バンドリム-パー ロング	*2
678-014	交換用パッド1/4 678-207/208/503用 (6個入)	
678-036	交換用パッド3/16 678-207/208/503用 (6個入)	
678-208	バンドリム-パー ショート	*2
678-014	交換用パッド1/4 678-207/208/503用 (6個入)	
678-036	交換用パッド3/16 678-207/208/503用 (6個入)	
678-210	モジュールセパレーティングブライヤー	*1
678-211	リガチャータイピングブライヤー コーン	*1
678-212	ダイレクトボンドブラケットホルダー	*1
678-216	チップバックブライヤー	*1
678-219	ブラケットリム-パー 直	*1
678-220L	ブラケットリム-パー アングル	*1
678-221	クラウン&バンドカンタリングブライヤー	*1
678-221M	クラウン&バンドカンタリングブライヤー M	*1
678-222	タイピングブライヤー スタイナー	*1
678-225	バンドクリンピングブライヤー	*1
678-225M	バンドクリンピングブライヤー M	*1

ワイヤーフォーミングブライヤー Wireforming Pliers 14-16

678-301	ジャラバックブライヤー	*1
678-302	スリージョーブライヤー	*1
678-303	オメガルーブフォーミングブライヤー	*1
678-002	交換用ブレード 678-303用 (1本入)	
678-018	交換用スクリュウ&ヘックスキー1/8 678-303用 (1本入)	

678-304	バードビークブライヤー	*1
678-305	ライトワイヤーバードビークブライヤー 溝付	*1
678-306	ツイードルーブフォーミングブライヤー ツイード	*1
678-307	アーチベンディングブライヤー ツイード	*1
678-307S	アーチベンディングブライヤー ツイードスリムタイプ	*1
678-308	レクタンギュラーアーチベンディングブライヤー ツイード	*1
678-309	リングルアーチフォーミングブライヤー	*1
678-310	ホローチップカンタリングブライヤー	*1
678-311	オブライエンブライヤー	*1
678-312	ミニスリージョーブライヤー	*1
678-315	ジェネラルカンタリングブライヤー	*1
678-316	ルーピングブライヤー マーコット	*1
678-317	ホローチップブライヤー	*1
678-318	ライトワイヤーバードビークブライヤー	*1
678-319	ナンスルーブフォーミングブライヤー	*1
678-320	アダムスブライヤー	*1
678-321	Vストップブライヤー	*1
678-322	NiTiバンダー 3プロング	*1
678-323	オプティカルブライヤー	*1
678-324	ルーブフォーミングブライヤー	*1
678-325	バードビークブライヤー カッター付	*1
678-326	バードビークブライヤー ロングテーパー	*1
678-328-20	トリーキングブライヤー 020 キー付 (.016 x .018)	*1
678-328-21	トリーキングブライヤー 021 キー付 (.018 x .022)	*1
678-020	トリーキングキー (.016 x .018)	
678-021	トリーキングキー (.018 x .022)	
678-340	ステップブライヤー 1/2mm	*1
678-341	ステップブライヤー 3/4mm	*1
678-342	ステップブライヤー 1mm	*1
678-327	ハンマーヘッドNiTiバンダー	*1

持針器・はさみ Needle Holders & Scissors 17

678-330	ニードルホルダー マッシュブライヤー スリムチップ 14cm	*3
678-331	ニードルホルダー マッシュブライヤー ワイドチップ 14cm	*3
678-332	ニードルホルダー マッシュブライヤー パーマッシュ 14cm	*3
WCS	ワイヤーカッティングシザーズ アングル	*6
SCGC	はさみ 金冠用 曲	*6
SCGS	はさみ 金冠用 直	*6
H4	止血鉗子 ホルステッド・モスキート 直 4	*9
TK020S	ワイヤーディレクター 直	*5

ハンドインストルメント Hand Instruments 18-19

678-910	ダルH5/33スケーラー	*8
678-911	ダルH6/H7スケーラー	*8
678-913	ダルU15スケーラー (片頭)	*8
678-906	バンドブッシャー&ダルスケーラー	*5
678-904	スケーラー&バンドブッシャー	*5
BPS1	バンドブッシャー&スケーラー 1	*5
BPS2	バンドブッシャー&スケーラー 2	*5
BP300	バンド&ワイヤーブッシャー 300	*5
BP300S	バンド&ワイヤーブッシャー 300S	*5
WBI-M/R	ワイヤーベンディングディレクター M/R	*4
PLPK	プラガー&リガチャーピッカー	*5
678-907	プラガー&リガチャーピッカー S	*5
678-909	プラガー&リガチャーピッカー L	*5
LDP	リガチャーディレクター&プラガー	*4
FE/LD	フィリオンエキスプローラー&リガチャーディレクター	*4
LDT	リガチャー タッカー	*5
678-912	リガチャー&バンドブッシャー	*5
678-908	リガチャーディレクター&バンドブッシャー	*4
LD1	リガチャーディレクター タッカー	*4
LDG2	リガチャーディレクター ジングラス	*4
678-905	リガチャーディレクター&スケーラー	*4
678-916	ピッカー&リガチャーディレクター	*4
TWLA	リガチャーアプリケーター	*5
SNLD1	SNディレクター .018	*4
SNLD2	SNディレクター .025	*4
TK018	リングルトリーキングキー	*5
678-706	リングルリガチャーディレクター	*4
678-707	リングルリガチャーディレクターU字型	*5

感染予防 Infection Prevention 20

IMNORTHS4	IMSカセット インフィニティ オーン S 薄型 パープル	
IMNORTHS8	IMSカセット インフィニティ オーン S 薄型 ブルー	
IMNORTHS9	IMSカセット インフィニティ オーン S 薄型 グリーン	
IMNORTHL4	IMSカセット インフィニティ オーン L 薄型 パープル	
IMNORTHL8	IMSカセット インフィニティ オーン L 薄型 ブルー	
IMNORTHL9	IMSカセット インフィニティ オーン L 薄型 グリーン	
IMORTHSM8	IMSカセット シグネチャー オーン S 薄型 ブルー	
IMORTHLG8	IMSカセット シグネチャー オーン L 薄型 ブルー	
ILS	IMS潤滑スプレー 236ml	
IMS-1455	シャインリニュー スティン&ラストリム-パー 20ワイブ	

*交換用パーツは 示しています。


クリアコレクションとは？

クリアコレクション(Clear Collection™)シリーズは、バイオメカニクスの特徴を用いた「目立ちにくい」アライナー矯正治療を個々の患者さんに合わせ、熱処理を必要とすることなく、最適化できるよう設計された革新的なインスツルメントです。



678-800 ¥25,200
Clear Collection - The Tear Drop
クリアコレクション
ティアドロッププライヤー

CPAの辺縁に使用することで、エラストックをかける際の涙滴状ホールをあけることができます。このホールを付与することにより、患者さん自身でエラストックをより簡単に交換することができます。

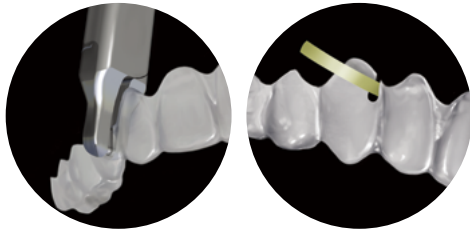


使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-801 ¥25,200
Clear Collection - The Vertical
クリアコレクション
パーティカルプライヤー

CPAのそれぞれの歯牙に対して、頬側・舌側の近心・遠心に垂直的なくぼみを付与します。このくぼみによりローテーションコントロールを促進します。

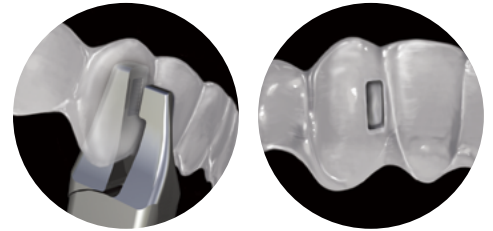


使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-802 ¥25,200
Clear Collection - The Horizontal
クリアコレクション
ホリゾンタルプライヤー

CPAのそれぞれの歯牙に対して、頬側・舌側の辺縁に水平的なくぼみを付与します。このくぼみによりトルクコントロールを促進します。

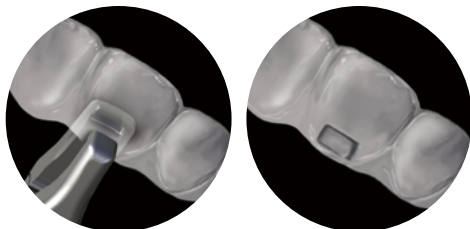


使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-803 ¥25,200
Clear Collection - The Hole Punch
クリアコレクション
ホールパンチプライヤー

CPAの辺縁に半月型のくりぬきを作り、リンガルボタンやブラケットなどを併用する際の接着位置を確保します。また、装着時に歯肉にあたる部分のトリミングに使用することも可能です。

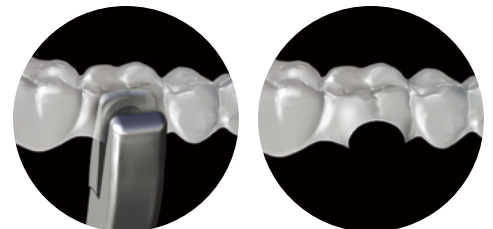


使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-804 ¥25,200
Clear Collection - The Spot
クリアコレクション
スポットプライヤー

小さな個々の歯牙の移動やライナーの保持力を高める点接触を作成するための、ごく小さな丸いくぼみを付与します。

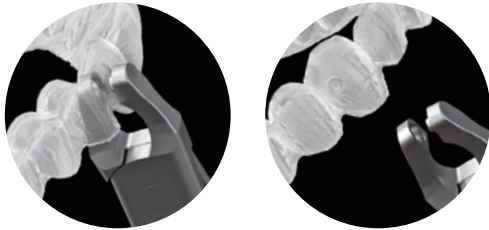


使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-805 ¥25,200
Clear Collection - The Petite Punch
クリアコレクション
ペティートパンチプライヤー

エラスティックをかけるためのリングボタンの接着位置を確保するために、ライナーの辺縁部に直径4.5mmの半月状のスペース(くりぬき)を作るためのインストルメントです。

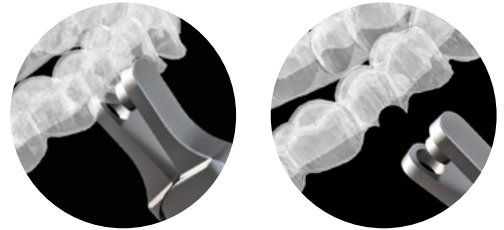

使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-807 ¥25,200
Clear Collection - The Counter Clockwise Wedge
クリアコレクション
カウンタークロックワイズウェッジプライヤー

特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の隅角で、ライナーに楔形のくぼみを作ることにより、回転応力を生じさせるために使用されるインストルメントです。半時計回りに回転させる際に使用されます。



使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-808 ¥25,200
Clear Collection - The Clockwise Wedge
クリアコレクション
クロックワイズウェッジプライヤー

特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の隅角で、ライナーに楔形のくぼみを作ることにより、回転応力を生じさせるために使用されるインストルメントです。時計回りに回転させる際に使用されます。




使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-811 ¥25,200
Clear Collection - The Eraser
クリアコレクション
イレイサープライヤー

不要なくぼみを元に戻す、または取り除くために設計されています。

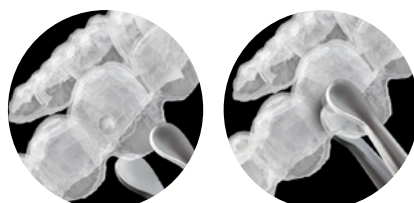


使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-809 ¥25,200
Clear Collection - The Bite Plane
クリアコレクション
バイトプレーンプライヤー

- クリアアライナーの前歯部舌側/口蓋側に沿ってアウトデント(凸)を付与
- 前歯への圧下力を利用してバイトターボのような効果をもたらし、前歯の過蓋咬合を矯正し臼歯部の開咬を改善

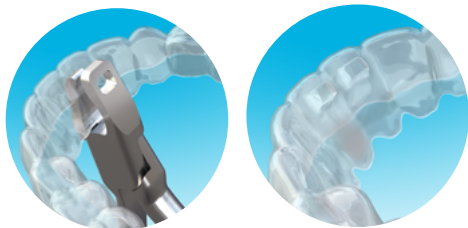


使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-810 ¥25,200
Clear Collection - The Bootstrap Punch
クリアコレクション
ブーツストラッププライヤー

- クリアアライナーの辺縁部に切り込みを付与しボタンの正確な装着のためのウィンドウを作成
- ブーツストラップ法により、アライナーに取付けた矯正用エラスティック(舌側のボタンから唇側のボタンにかける)により、移動が遅延している歯牙をアライナートレー内に適切に収めるサポート
- 歯肉を圧迫するプラスチックの切取りにも使用

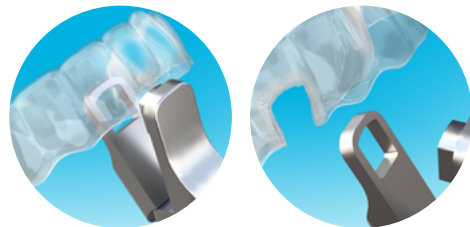


使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-812 ¥25,200
Clear Collection - The Precision Aligner Punch
クリアコレクション
プレジションアライナーパンチプライヤー

- クリアアライナーの臼歯部の頬側および舌側の辺縁部に三角形のカットアウトを付与
- G2 Metal & Mini Precision Aligner Buttons®やさらに小さなボタンを正確に配置するための対称的なウィンドウを作成
- 歯肉を圧迫するプラスチックの切取りにも使用可能
- スプリング付

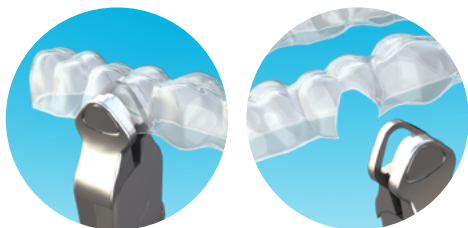


使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-813 ¥25,200
Clear Collection - The Multi Punch
クリアコレクション
マルチパンチプライヤー

- クリアアライナーのアクセスしにくい咬合面にカットアウトを付与
- 咬合面にボンディングされたターボに配慮
- 頬側、舌側、そして咬合面の穴あけが可能

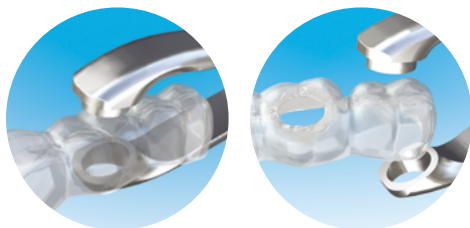

使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)

スリムコレクションとは?

矯正歯科の先生は、日々の診療や多忙なスケジュールに加え、すべての患者さんに良好な治療結果を提供するため、常にプレッシャーの下で大変な日々を送っておられます。

そこで、ヒューフレディグループは術者にとって『より効果的』で、患者さんにとって『より快適な』治療の実現を

お手伝いすべく、『スリム』なヘッドの9種類の矯正用インスツルメントを開発いたしました。

スリムコレクションの利点

- より良い口腔内のアダプテーション
- 口腔内での操作性の向上
- より患者さんにやさしいデザイン
- 施術時間の短縮による患者さんとのコミュニケーション時間の増加



678-113 ¥30,500

Slim Flush Cut & Hold
Distal End Cutter


スリムディスタルエンドカッター
フラッシュカット&ホールド

従来品(678-111)よりヘッドが50%スリムになり、
カットポイントが見やすく、より優れた操作性を発揮。
切断されたワイヤーを把持するホールドタイプで、
ロールワッテやガーゼ等を使用せずフラッシュカットが可能。

【切断許容径】.012"-.021" x .025"

678-013 ¥1,500

交換用シリコンインサート 678-113用 (3個入)

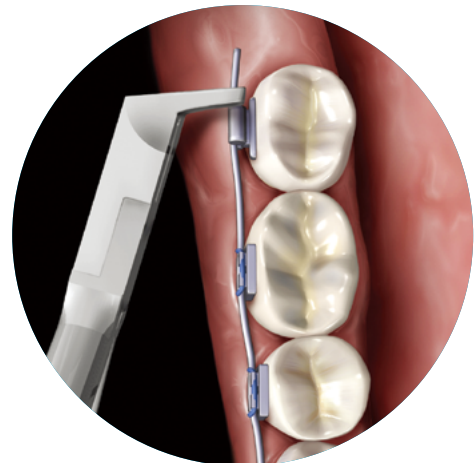

バックルチューブ内に挿入されたアーチワイヤーを切断し
ている咬合面観




Slim Collection
スリムコレクション

678-500 ¥25,200
Slim Micro Cutter
スリムマイクロカッター

くりぬかれた形状のヘッドは従来品(678-110)と比べ13%スリムになり、より容易にエラスティック除去が可能。

【切断許容径】-.012"

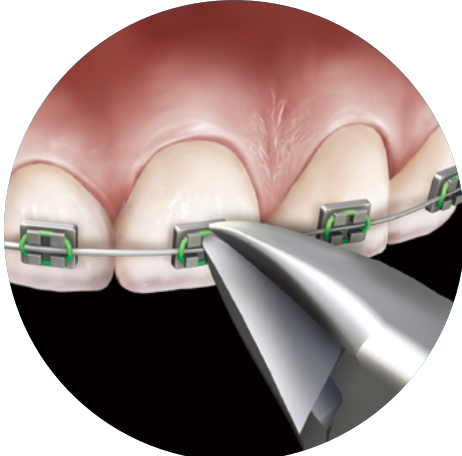


エラスティック切断の唇側面観



678-501 ¥22,100
Ultra Slim Weingart Pliers
ウルTRASリムワインガルトプライヤー

従来品(678-202)と比べ20%スリムになり、ギザがついたコンパクトなヘッドが確実にワイヤーを把持。限られたスペースでも指先の延長のように操作でき、容易にアーチワイヤーをパッカルチューブやブラケットスロットに通すことが可能。

【ワイヤー使用許容径】-.030"

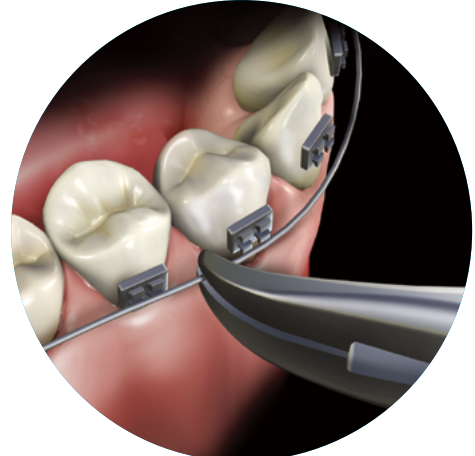

アーチワイヤーをブラケットスロットに挿入している頬側面観



678-502 ¥22,100
Slim Hammerhead NiTi Pliers
スリムハンマーヘッドNiTiプライヤー

熱処理せずにNiTiワイヤーを曲げる事が可能。従来品(678-327)と比べヘッドが10%スリムになり、更に広い視野を確保し、患者さんの不快感を軽減。

【屈曲許容径】-.025"

図1


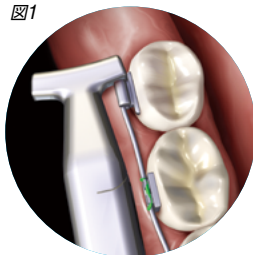


図2



NiTiワイヤーを遠心から歯肉側に曲げている咬合面観
〈図1〉 舌側面方向に曲げている頬側面観
〈図2〉 ワイヤー屈曲図(P.12参照)

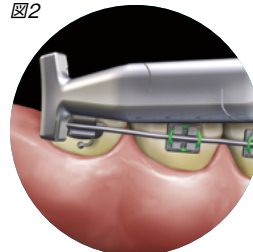


678-503 ¥22,100
Slim Band Removing Pliers
スリムバンドリムービングプライヤー

従来品(678-207、678-208)よりヘッドが21%スリムになり、先端によりテーパーがついたことで、より大白歯へ到達し易く、歯肉を傷つけにくく、患者さんに与える不快感を軽減。

678-014 ¥2,100
交換用パッド1/4 678-207/208/503用 (6個入)

678-036 ¥2,100
交換用パッド3/16 678-207/208/503用 (6個入)

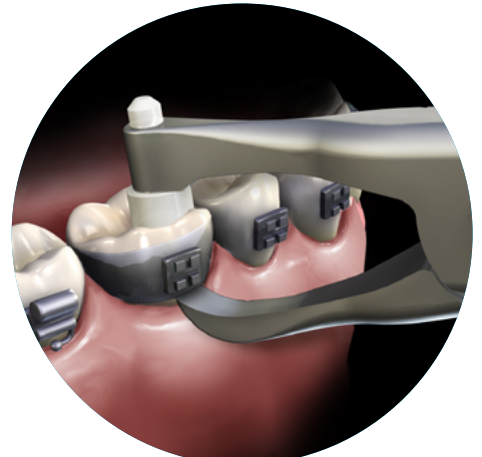

バンドを除去している頬側面観




678-504 ¥12,600

Slim Direct Bond
Bracket Tweezers

スリムダイレクトボンドブラケットツイーザー

従来品(678-212)と比べ50%スリムになったヘッドにより、広がった視野が作業効率を向上。後端は細く尖っておりブラケット位置の微調整等が可能。

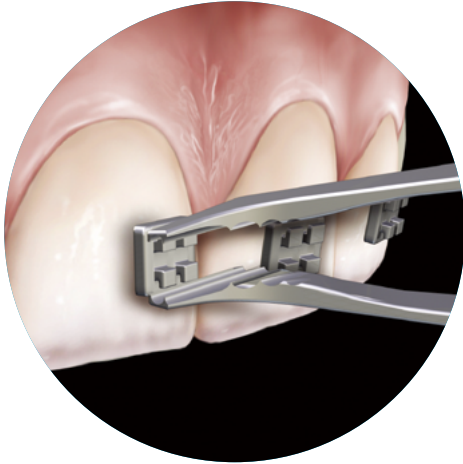

ブラケットを装着している唇側面観




678-505 ¥12,600

Ultra Slim Buccal Tube
Bonder Tweezers

ウルTRASリムバッカルチューブ
ボンダーツイーザー

非常にコンパクトなヘッドはバッカルチューブの接着に適用。

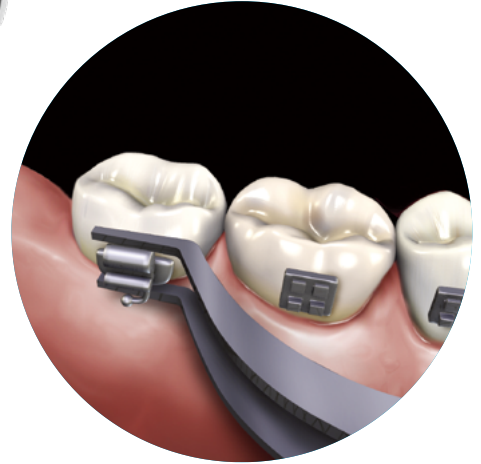

バッカルチューブを装着している頬側面観





678-506 ¥9,500

Slim Distal Cinch Back Hand Instrument

スリムディスタルシンチバックハンドインスツルメント

.021" x .025"までのステンレススチールアーチワイヤーのシンチバックに使用。細いヘッドが臼歯部での広い視野を確保。

【屈曲許容径】-.021" x .025"

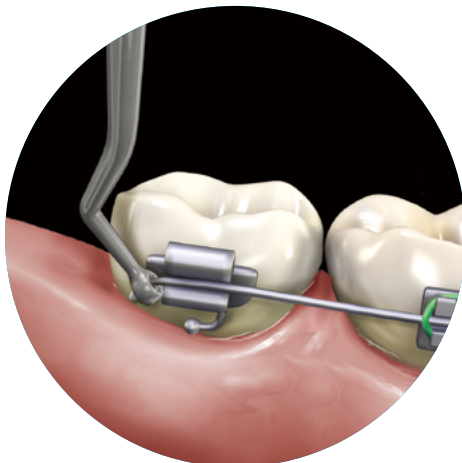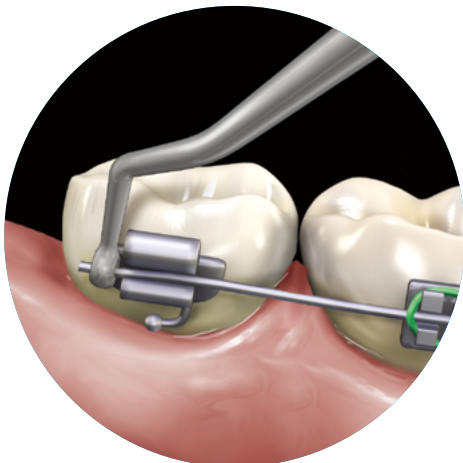

バッカルチューブ遠心部の余剰ワイヤーを屈曲している頬側面観




リンガルコレクションの利点

- より容易な口腔内へのアクセス
- 術者にとってより良い視野
- 患者さんの快適さの向上
- 施術時間短縮による患者さんへの教育時間の増加

オービットジョイント部分が
従来品と比べて
14%～29%スリム

スタンダードハンドルより
1.9cm～3cm
長くなったハンドル

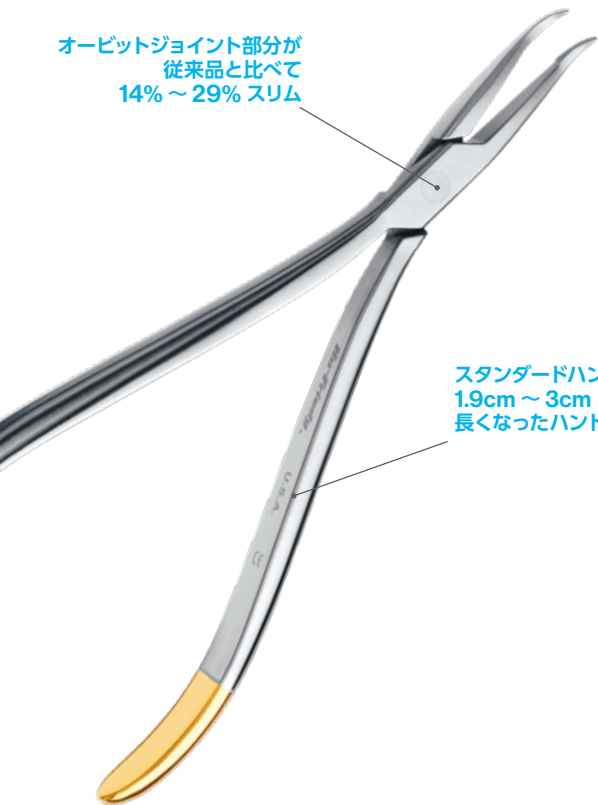

678-709 ¥39,900
Lingual Debonding Pliers

リンガル ディボンディングプライヤー
スプリングの反発力を応用して、舌側矯正用ブラケットを最小限の力でスムーズに除去。患者さんの快適性を損なうことなくブラケットを素早くディボンディング可能。



ディボンディングプライヤーの一方のフック型アームが舌側のブラケット下部に届くようになっています。



もう一方のくさび型チップをブラケットと歯面の接着境界に差し込むようにしながら、タイウィングの下にアームのフックをひっかけます。プライヤーを握ると、くさび型チップが歯牙とブラケットの接着境界に挿入され、ブラケットを剥離します。




使用方法はこちらから
ご覧いただけます。
(英語)



678-700 ¥39,900
Lingual Distal End Cutter
リンガル ディスタルエンドカッター

【切断許容径】-.018"

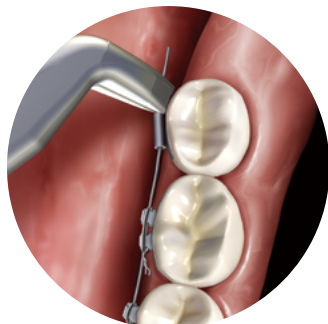


リンガルチューブ遠心部に出た過剰なワイヤーを切断している咬合面観



678-701 ¥39,900
Lingual Pin & Lig Cutter
リンガル ピン&リガチャーカッター

【切断許容径】-.012"

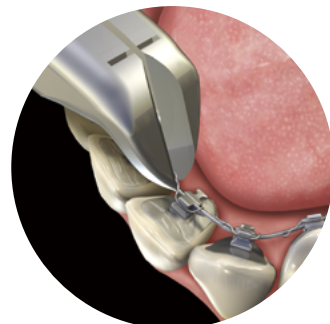

リガチャーワイヤーの過剰部分を切断している咬合面観






678-702 ¥36,800
Lingual Weingart Pliers
リンガル ワインガルトプライヤー

678-702-90 ¥36,800
Lingual Weingart Pliers, 90° Bend
リンガル ワインガルトプライヤー 90°

【ワイヤー使用許容径】-.030"

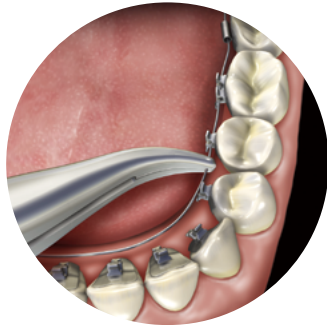

ブラケットのスロットにアーチワイヤーを挿入している咬合面観



678-702



678-702-90



678-703 ¥36,800
Lingual Bracket Removing Pliers
リンガル ブラケットリムービングプライヤー



ブラケットをディボンディングしている咬合面観



678-704 ¥36,800
Lingual Hammerhead NiTi Pliers
リンガル ハンマーヘッドNiTiプライヤー

678-704SER ¥36,800
Lingual Hammerhead NiTi Pliers with Serrations
リンガル ハンマーヘッドNiTiプライヤーギザ付

【屈曲許容径】-.025"



リンガルチューブ遠心から出たNiTiワイヤーを曲げている咬合面観



678-704



678-704SER



678-705 ¥36,800
Lingual Mathieu Pliers
リンガル マシュープライヤー

【ワイヤー使用許容径】-.015"



ブラケットスロットにアーチワイヤーを固定するためリガチャーワイヤーを結紮している咬合面観



Cutters
カッター



678-101 ¥25,200
Universal Distal
End Cutter w/hold
ユニバーサルディスタルエンド
カッター ホールド

678-101L ¥25,200
Universal Distal End Cutter
w/hold, Long Handle
ユニバーサルディスタルエンド
カッター ホールド ロング

【切断許容径】.012"-.021" x .025"



678-102 ¥25,200
Distal End Cutter, Flush Cut
ディスタルエンドカッター
フラッシュカット

【切断許容径】-.021" x .025"



678-103 ¥25,200
Hard Wire Cutter, 15°
ハードワイヤーカッター 15°
オフセット15°で届きにくい部位
でも容易に切断が可能

【切断許容径】-.022" x .028"



678-104 ¥25,200
Hard Wire Cutter, Straight
ハードワイヤーカッター 直

【切断許容径】-.022" x .028"



678-105 ¥25,200
Pin & Ligature Cutter
ピン&リガチャーカッター

【切断許容径】-.015"



678-106 ¥25,200
Mini Pin & Ligature Cutter
ミニピン&リガチャーカッター
スリムタイプのピンカッター

【切断許容径】-.012"



678-107 ¥25,200
Micro Mini Pin &
Ligature Cutter
マイクロミニピン &
リガチャーカッター

678-107L ¥25,200
Micro Mini Pin &
Ligature Cutter,
Long Handle
マイクロミニピン &
リガチャーカッター ロング
スリムタイプで狭いエリアでの
作業が容易

【切断許容径】-.012"




678-109 ¥25,200
Micro Mini
Ligature Cutter, 15°
マイクロミニピン &
リガチャーカッター 15°
オフセット15°スリムカッター

【切断許容径】-.012"



678-110 ¥25,200
Micro Cutter
マイクロカッター
コンパクトな作業部が特徴


【切断許容径】-.012"

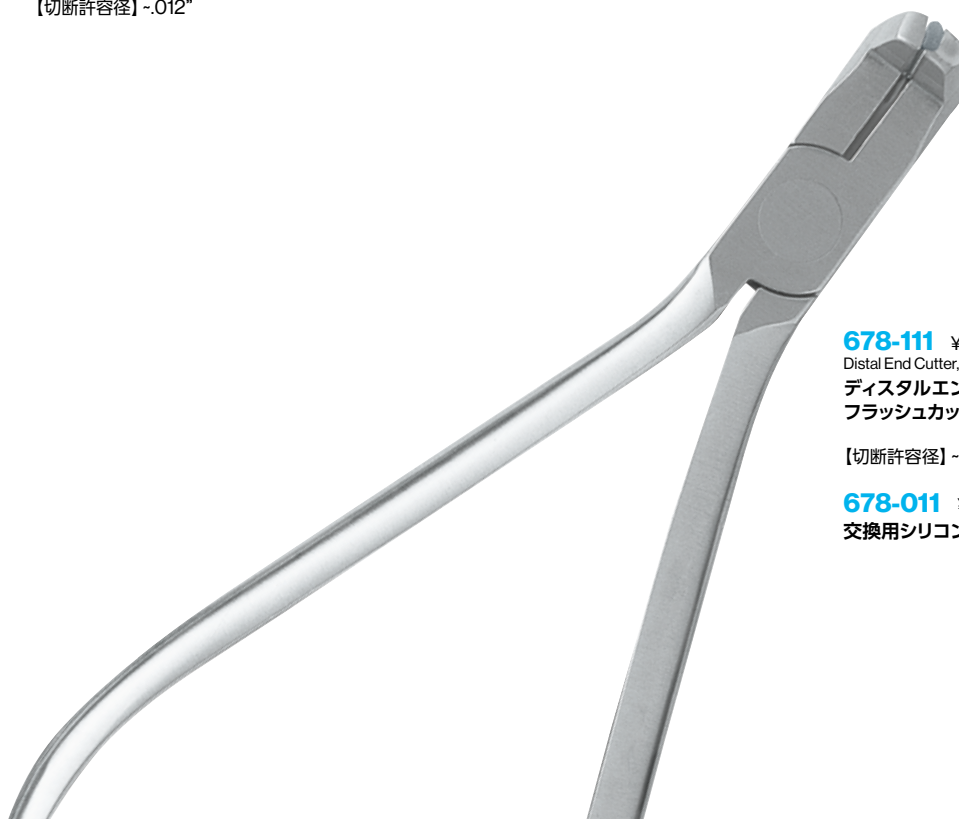

678-111 ¥30,500
Distal End Cutter, Flush Cut w/hold
ディスタルエンドカッター
フラッシュカット&ホールド

【切断許容径】-.020" ホールド/切断

678-011 ¥1,500
交換用シリコンインサート 678-111用 (3個入)

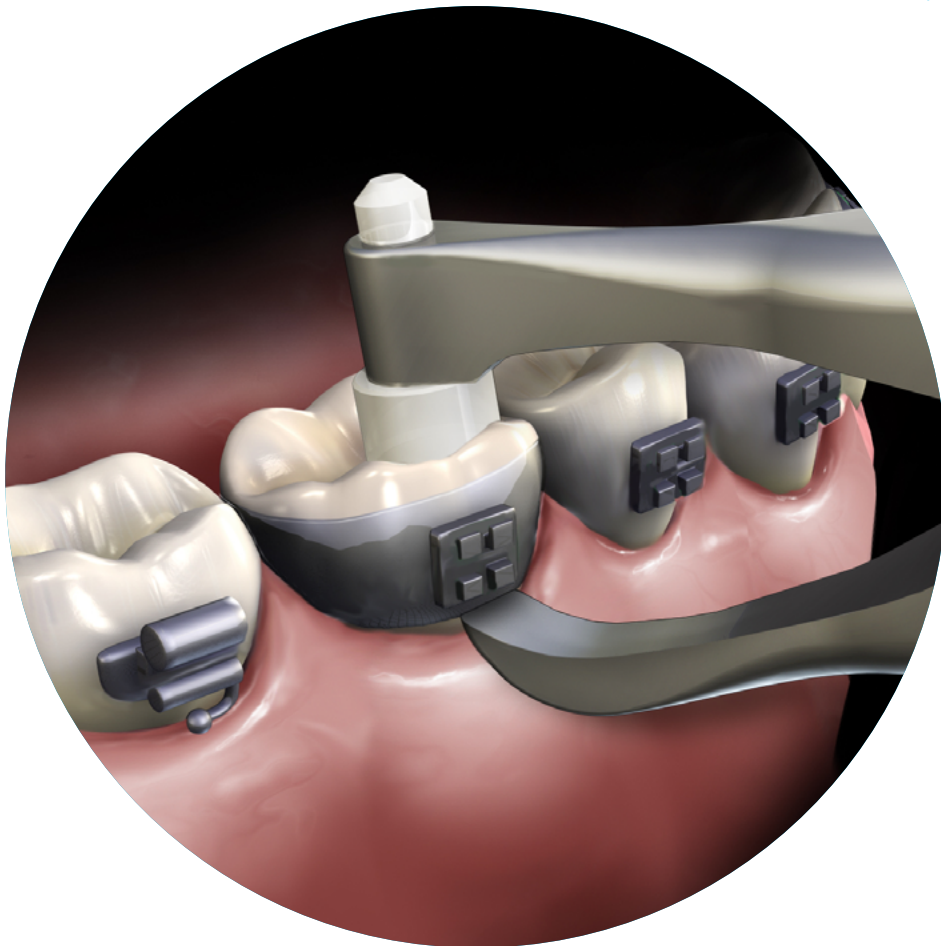

678-201 ¥22,100
Weingart Pliers
ワインガルトプライヤー
678-201L ¥22,100
Weingart Pliers, Long Handle
ワインガルトプライヤー ロング
32°アングル付。アーチワイヤーの
装着・撤去に適しておりギザ付先端に
より把持が容易
【ワイヤー使用許容径】-.030"



678-202 ¥22,100
Slim Weingart Pliers
スリムワインガルト
プライヤー
20°アングル付
【ワイヤー使用許容径】-.030"



678-203 ¥22,100
How Pliers, Straight
ホープライヤー 直
ワイヤーやピン等の着脱に
適した多目的プライヤー
【ワイヤー使用許容径】-.030"



678-204 ¥22,100
How Pliers, Offset
ホープライヤー
オフセット
40°アングル付。ワイヤーやピン等の
着脱に適した多目的プライヤー
【ワイヤー使用許容径】-.030"



678-205 ¥22,100
Band Seating Pliers
バンドシーティング
プライヤー
バンド把持用のギザ付

Utility Pliers

ユーティリティプライヤー



678-206 ¥22,100
Adhesive Removing Pliers
アドヒーズリムーバー
プライヤー
ブラケットディボンディング
後の歯面に残った接着剤
除去用

678-014A ¥2,100
交換用パッド1/4
678-206用(6個入)

678-001 ¥1,700
交換用ブレード
678-206用(1本入)



678-207 ¥22,100
Band Removing
Pliers, Long
バンドリムーバー
ロング
白歯バンド撤去用

678-014 ¥2,100
交換用パッド1/4
678-207/208/503用
(6個入)

678-036 ¥2,100
交換用パッド3/16
678-207/208/503用
(6個入)



678-208 ¥22,100
Band Removing
Pliers, Short
バンドリムーバー
ショート
白歯バンド撤去用。ショート

678-014 ¥2,100
交換用パッド1/4
678-207/208/503用
(6個入)

678-036 ¥2,100
交換用パッド3/16
678-207/208/503用
(6個入)



678-210 ¥29,400
Force Module Separating Pliers
モジュールセパレーティング
プライヤー
歯間分離用モジュール装着用




678-211 ¥29,400
Ligature Tying Pliers, Coon Style
リガチャータイピング
プライヤー コーン
コーンタイプ、リガチャー
ワイヤー結紮用

【ワイヤー使用許容径】-.015"



678-212 ¥12,600
Direct Bond Bracket Holder
ダイレクトボンド
ブラケットホルダー

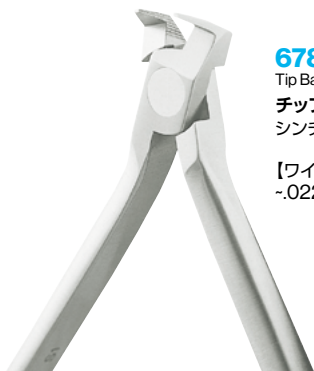

678-216 ¥22,100
Tip Back Pliers
チップバックプライヤー
シンチバック用

【ワイヤー使用許容径】
-.022" x .025"



678-219 ¥22,100
Bracket Removing Pliers, Straight
ブラケットリムーバー 直
メタル、プラスチック、
セラミック等すべての素材の
ブラケットディボンディングに
適用



678-220L ¥22,100
Angulated Bracket Remover
ブラケットリムーバー
アングル
前歯・白歯部用ブラケット
ディボンディングに適用



678-221 ¥22,100
Crown & Band
Contouring Pliers
クラウン&バンド
カンタリングプライヤー
バンド調整用

678-221M ¥22,100
Crown & Band
Contouring Pliers, Modified
クラウン&バンド
カンタリングプライヤー M
バンド調整用
(作業長が678-221と比較
して約1mmスリム)



678-222 ¥31,500
Steiner Tying Pliers
タイピングプライヤー
スタイナー
スタイナータイプ、
リガチャーワイヤー結紮用

【ワイヤー使用許容径】-.015"



678-225 ¥22,100
Band Crimping Pliers
バンドクリンピング
プライヤー
スリムな作業部により大臼歯・
小臼歯バンドの調整が可能

678-225M ¥22,100
Band Crimping Pliers, Modified
バンドクリンピング
プライヤー
スリムな作業部により大臼歯・
小臼歯バンドの調整が可能
スプリング付

Wire Forming Pliers ワイヤーフォーミングプライヤー



678-301 ¥22,100
Jarabak Pliers
ジャラバックプライヤー
ワイヤーバンドやクローズ用
溝・ギザ付で把持も容易
【屈曲許容径】-.020"



678-302 ¥22,100
Three Jaw Pliers
スリージョブプライヤー
カンタリング、オーダーバンド用
【屈曲許容径】-.030"



678-303 ¥22,100
Omega Loop Forming Pliers
オメガループフォーミング
プライヤー
3段階(.045"、.060"、.075")の
作業部でオメガループを正確に
フォーミング
【屈曲許容径】-.022" x .025"

678-002 ¥1,500
交換用ブレード
678-303用(1本入)

678-018 ¥900
交換用スクリュー&
ヘックスキー1/8
678-303用(1本入)




678-304 ¥22,100
Bird Beak Pliers
バードビークプライヤー
ラウンドワイヤーの
ループ成形用
【屈曲許容径】-.030"



678-305 ¥22,100
Light Wire Bird Beak Pliers with
Groove
ライトワイヤー
バードビークプライヤー
溝付
678-304より作業部が長く
溝付
【屈曲許容径】-.020"




678-306 ¥22,100
Tweed Loop Forming Pliers
ツイードループ
フォーミングプライヤー
ツイード
3段階(.055"、.075"、.090")の
作業部で正確にフォーミング
【屈曲許容径】-.022" x .025"

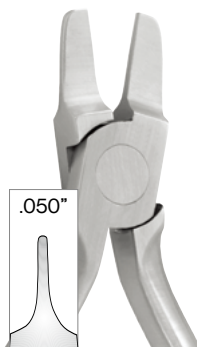


678-307 ¥22,100
Arch Bending Pliers,
Tweed
アーチベンディング
プライヤー ツweed
ブレード幅.050"。
ファースト、セカンド、サード
オーダーバンド用
【屈曲許容径】-.022" x
.025"

.050"

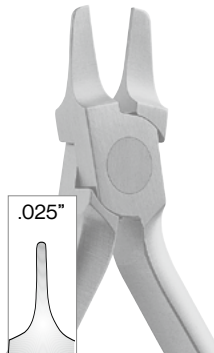

678-307S ¥22,100
Arch Bending Pliers,
Tweed Slim
アーチベンディング
プライヤー ツweed
スリムタイプ
ブレード幅.025"。
ファースト、セカンド、サード
オーダーバンド用
【屈曲許容径】-.022" x .025"

.025"

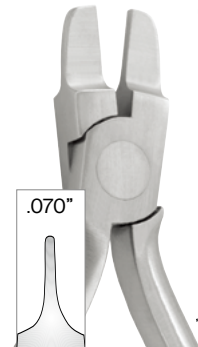

678-308 ¥22,100
Rectangular Arch Bending Pliers
レクタンギュラー
アーチベンディングプライヤー
ツイード
ブレード幅.070"。
ファースト、セカンド、サード
オーダーバンド用
【屈曲許容径】-.022" x .025"

.070"



678-309 ¥22,100
Lingual Arch Forming
Pliers
リンガルアーチフォーミング
プライヤー
.030" & .036"リンガル
アーチ用
【屈曲許容径】-.036"




678-310 ¥22,100
Hollow Chop Contouring Pliers
ホローチョップ
カンタリングプライヤー
あらゆる種類のアーチワイヤーの
微妙なカーブの付与が可能
【屈曲許容径】-.030"

【屈曲許容径】-.030"



678-311 ¥22,100
O'Brien Pliers
オブライエンプライヤー
ヘリカルループの成形や口腔内での
チップバックバンドに適用
【屈曲許容径】-.020"

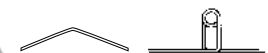


Wire Forming Pliers

ワイヤーフォーミングプライヤー



678-312 ¥22,100
Mini Three Jaw Pliers
ミニスリージョープライヤー
丸みのある先端により
ライトワイヤーの調節が可能

【屈曲許容径】-.030"

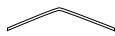

678-315 ¥22,100
General Contouring Pliers
ジェネラルカンタリング
プライヤー
ギザ付

【屈曲許容径】-.021" x .025"



678-312
(原寸大)



678-316 ¥22,100
Marcotte Looping Pliers
ルーピングプライヤー
マーコット
マーコットプライヤー。
ヘリカルループ、Tループ製作用

【屈曲許容径】-.022" x .025"



678-317 ¥22,100
Hollow Chop Pliers
ホローチョップ
プライヤー
678-310より緩やかなカーブの
付与が可能

【屈曲許容径】-.030"



678-318 ¥22,100
Light Wire Bird Beak Pliers
ライトワイヤー
バードビークプライヤー
678-305の溝なしタイプ

【屈曲許容径】-.020"



678-319 ¥22,100
Nance Loop Forming Pliers
ナンスループ
フォーミングプライヤー
3mm、4mm、5mm、6mmの
4種類のステップで正確な
ループを製作

【屈曲許容径】-.022"



678-320 ¥22,100
Adams Pliers
アダンプライヤー
アダムスクラスプの製作や
調整に適用

【屈曲許容径】-.040"



678-321 ¥22,100
V-Stop Pliers
Vストッププライヤー

【屈曲許容径】-.022" x .025"



678-322 ¥22,100
NiTi Bender, 3-Prong
NiTiベンダー 3プロング
NiTi含む全ての
アーチワイヤーに適用

【屈曲許容径】-.020"



678-323 ¥22,100
Optical Pliers
オプティカルプライヤー
ヘリカルクローズングループの
製作や微調整用

【屈曲許容径】-.022" x .025"

Wire Forming Pliers ワイヤーフォーミングプライヤー



678-324 ¥22,100
Old Style Loop Pliers
ループフォーミングプライヤー
3段階のラウンドチップで
ループフォーミング、
ループクローズングに適用
【屈曲許容径】-.022" x .025"



678-325 ¥22,100
Bird Beak with Cutter
**バードビークプライヤー
カッター付**
ワイヤーのベンダやカットが
一本で可能
【屈曲許容径】-.022" x .025"



678-326 ¥22,100
Bird Beak, Long Tapered
**バードビークプライヤー
ロングテーパー**
多様なループ成形が可能
【屈曲許容径】-.022" x .025"



678-328-20 ¥22,100
Torquing Pliers
with .016" / .018" key
**トーキングプライヤー
020キー付 (.016" x .018")**

678-328-21 ¥22,100
Torquing Pliers
with .018" / .022" key
**トーキングプライヤー
021キー付 (.018" x .022")**



678-020 (1本入) ¥2,100
Torquing Key .016" / .018"
トーキングキー .016" x .018"
【屈曲許容径】-.018"


678-021 (1本入) ¥2,100
Torquing Key .018" / .022"
トーキングキー .018" x .022"
【屈曲許容径】-.022"



678-340 ¥22,100
Step Pliers, 1/2 mm
ステッププライヤー 1/2mm
【屈曲許容径】-.022" x .025"


678-341 ¥22,100
Step Pliers, 3/4 mm
ステッププライヤー 3/4mm
【屈曲許容径】-.022" x .025"

678-342 ¥22,100
Step Pliers, 1 mm
ステッププライヤー 1mm
【屈曲許容径】-.022" x .025"


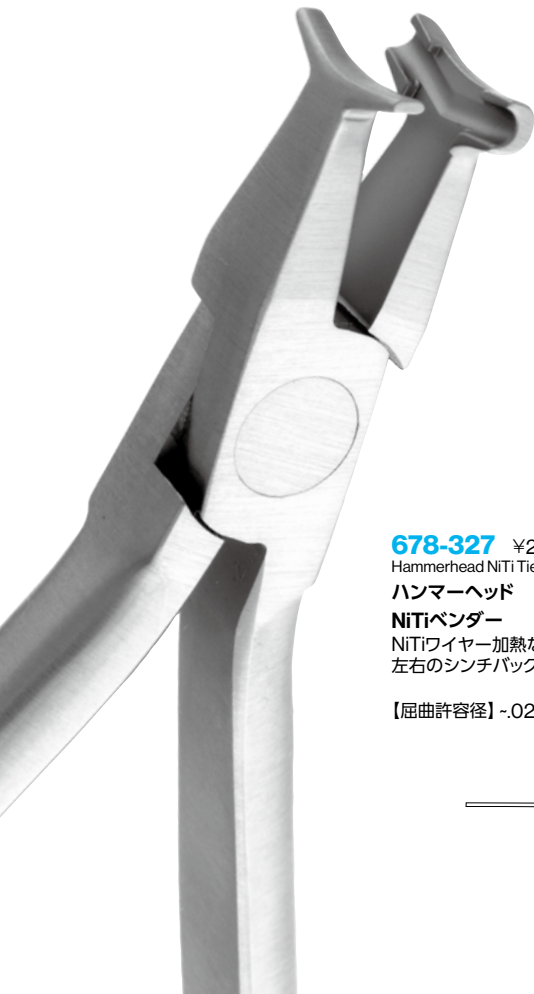


678-327 ¥22,100
Hammerhead NiTi Tie Back Pliers
**ハンマーヘッド
NiTiベンダー**
NiTiワイヤー加熱なしでベンダ可能
左右のシンチバック適用
【屈曲許容径】-.025"


【ハンマーヘッド屈曲例】

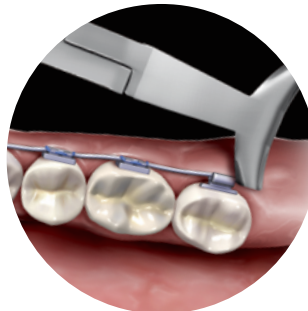

A. NiTiワイヤーを遠心から歯肉側に曲げている咬合面観

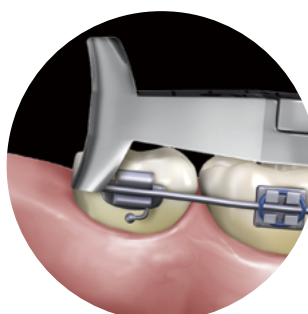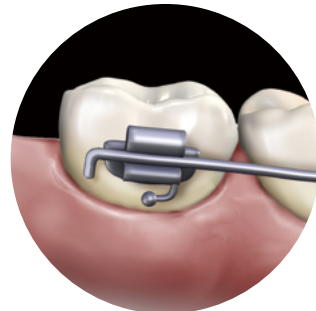


B. 舌側面方向に曲げている頬側面観

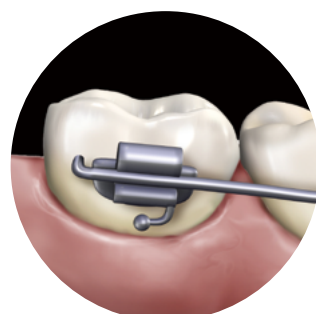

Needle Holders & Scissors

持針器・はさみ

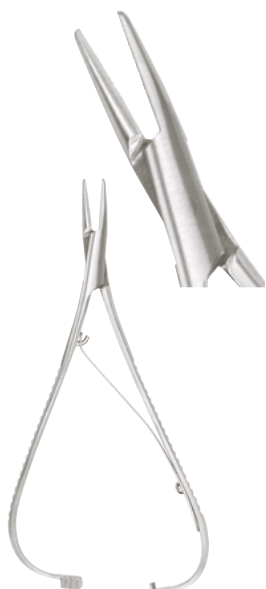

678-330 ¥23,100

Mathieu Plier, Slim Tip
ニードルホルダー
マッシュプライヤー
スリムチップ 14cm

エラスティック用



678-331 ¥23,100

Mathieu Plier, Wide Tip
ニードルホルダー
マッシュプライヤー
ワイドチップ 14cm

【ワイヤー使用許容径】-.015"



678-332 ¥42,000

Mathieu Plier,
Perma Sharp
ニードルホルダー
マッシュプライヤー
パーマシャープ 14cm

【ワイヤー使用許容径】-.015"



WCS ¥23,100

Wire Cutting Scissors, Angled
ワイヤーカッティングシザーズ
アングル
ギザ・溝付



SCGC ¥12,600

Crown & Gold Scissors, Curved
はさみ 金冠用 曲



SCGS ¥12,600

Crown & Gold Scissors, Straight
はさみ 金冠用 直



H4 ¥10,300

Mosquito Hemostat Straight
止血鉗子
ホルステッド・モスキート直 4



TK020S ¥10,300

Lingual Torquing Key, Straight
ワイヤーディレクター 直



678-910 ¥9,500
Dull H5/33 Scaler
ダルH5/33スケーラー
ハンドル #6



678-911 ¥9,500
Dull H6/H7 Scaler
H6/H7スケーラー
ハンドル #6



678-913 ¥9,500
Dull U15 Scaler
ダルU15スケーラー(片頭)
ハンドル #6



678-906 ¥9,500
Band Pusher/Dull Scaler
バンドプッシャー &
ダルスケーラー
ハンドル #6



678-904 ¥9,500
Scaler Band Pusher
スケーラー & バンドプッシャー
ハンドル #6



BPS1 ¥7,200
Band Pusher/Scaler 1
バンドプッシャー &
スケーラー 1
ハンドル #41



BPS2 ¥7,200
Band Pusher/Scaler 2
バンドプッシャー &
スケーラー 2
ハンドル #41



BP300 ¥9,500
バンド & ワイヤープッシャー
300
ハンドル #502

BP300S ¥9,500
バンド & ワイヤープッシャー
300S
ショート、ハンドル #506



WBI-M/R ¥9,500
Wire Bending Director M/R
ワイヤーベンディング
ディレクター M/R
ハンドル #1



PLPK ¥4,200
Plugger/Ligature Picker
プラグー &
リガチャーピッカー
ハンドル #41



678-907 ¥9,500
Plugger/Ligature Picker,
Small
プラグー & リガチャー
ピッカー S
ハンドル #6



678-909 ¥9,500
Plugger/Ligature Picker,
Large
プラグー & リガチャー
ピッカー L
ハンドル #6



LDP ¥6,100
Ligature Director/Plugger
リガチャーディレクター &
プラグー
ハンドル #41



FE/LD ¥7,400
Fillion Explorer/
Ligature Director
フィリオン
エキスプローラー &
リガチャーディレクター
ハンドル #41

HANDLE DESIGN (ハンドルの形状)

【両頭】



#2 角柄



#41 丸柄



#6 サテンスチール


【片頭】



#1 角柄



#6 サテンスチール

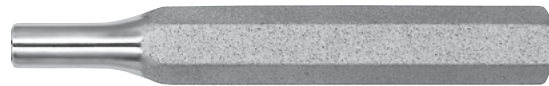

#502



#506

Hand Instruments

ハンドインスツルメント



LDT ¥9,500
Ligature Ticker
リガチャー タッカー
ハンドル #2



678-912 ¥9,500
Ligature Band Pusher
リガチャー & バンドプッシャー
ハンドル #6



678-908 ¥9,500
Ligature Director/
Band Pusher
リガチャーディレクター &
バンドプッシャー
ハンドル #6



LD1 ¥9,500
Ligature Director/Tucker
リガチャーディレクター
タッカー
ハンドル #2



LDG2 ¥9,500
Ligature Director, Gingrass
リガチャーディレクター
ジングラス
ハンドル #2



678-905 ¥9,500
Ligature Director/Scaler
リガチャーディレクター &
スケーラー
ハンドル #6



678-916 ¥9,500
Picker/Ligature Director
ピッカー &
リガチャーディレクター
ハンドル #6



TWLA ¥5,300
Ligature Applicator
リガチャーアプリケーター
ハンドル #41



SNLD1 ¥9,500
SN Director, .018"
SNディレクター .018"
ハンドル #6



SNLD2 ¥9,500
SN Director, .025"
SNディレクター .025"
ハンドル #6



TK018 ¥10,300
Lingual Torquing Key
リンガルトーキングキー
ハンドル #6



678-706 ¥10,500
Lingual Ligature Director
リンガル リガチャー
ディレクター
ハンドル #6



678-707 ¥10,500
Lingual Ligature Director,
U Shape
リンガル リガチャー
ディレクターU字型
ハンドル #6



IMSカセット インフィニティ
オーソ S 薄型 ¥23,100
(外形寸法:178 x 203 x 19mm)

- パープル **IMNORTHS4**
- ブルー **IMNORTHS8**
- グリーン **IMNORTHS9**



IMSカセット インフィニティ
オーソ L 薄型 ¥28,400
(外形寸法:203 x 280 x 19mm)

- パープル **IMNORTHL4**
- ブルー **IMNORTHL8**
- グリーン **IMNORTHL9**



IMSカセット シグネチャー
オーソ S 薄型 ¥18,900
(外形寸法:178 x 203 x 19mm)

- ブルー **IMORTHSM8**



IMSカセット シグネチャー
オーソ L 薄型 ¥24,200
(外形寸法:203 x 280 x 19mm)

- ブルー **IMORTHLG8**



ILS ¥3,200
IMS Instrument
Lubricant Spray
IMS潤滑スプレー 236ml

ヒンジ部の動きを
スムーズにします。



IMS-1455 ¥1,400
IMS SHINE reNEW™
Instrument Wipes
シャインリニュー
ステイン&ラスト
リムーバー 20枚入

IMS 4-step Process


IMS(インストゥルメントマネージメントシステム)4ステッププロセス

IMS(Instrument Management System)

安全性と効率性の追求を具体化する製品群です。

カセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。


チェアサイド

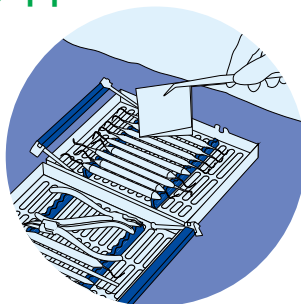

对患者さんへの良好な イメージ作りおよびアピール

- ・ 処置内容ごとに器材を適切に取り扱う
→ 必要な器材を探すための時間短縮・
患者さんとの時間を充実
- ・ 歯周病やインプラントなど、専用の器材を
効率よく取り扱う
→ 専門性をアピール


洗浄

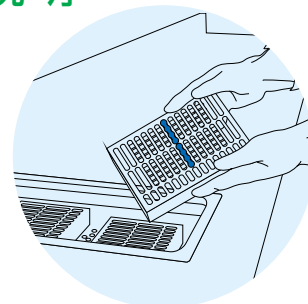

作業手順と整理

- ・ 器材はセット組みされた状態で、洗浄・
すすぎおよび乾燥のプロセスを行う
→ 器材の損傷および喪失を防止
- ・ 作業手順の削減
→ 鋭利な器材による針刺し事故の
危険性低減


滅菌

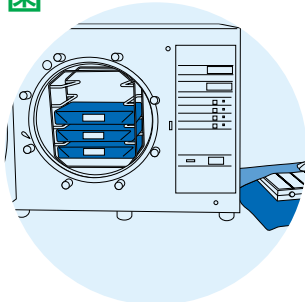

包装と滅菌器への挿入

- ・ 器材を一つのカセットにまとめて収納
→ 滅菌バッグなどの消耗品のコストを削減
- ・ 器材処理に関わる手間を省く
→ より安全な作業の実現・ケガの危険性を削減

保管

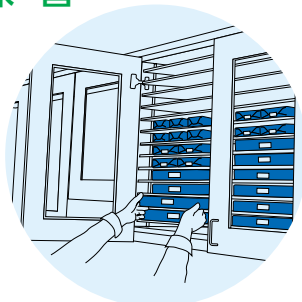

効率性と完結性

- ・ 滅菌終了後、簡便に収納・保管
→ 滅菌直後の使用も可能
- ・ 処置内容ごとに器材を一括して組立て
→ 治療前の準備や取扱いが容易

潤滑

- ヒンジ部分がある器具は、最低一週間に一度は滅菌前に潤滑剤を塗布してください。
- 継続的な潤滑剤の使用により、器具をさらに長くご使用頂けますので、器具の使用頻度や使用用途別に潤滑剤の使用回数を調整してください。
- 潤滑剤は、ヒンジ器具への専用のIMS 潤滑スプレー (ILS) などをご使用ください。

クリーニング

- 器具をご使用後は、直ちにセメント・血液・組織・その他有機物などの付着物を除去してください。ヒューフレディグループ製エンザイマックス (Enzymax™) をはじめとした、医療器具用の酵素系中性洗剤を使用した超音波洗浄を推奨します。
- 超音波洗浄に使用する薬液は、必要に応じて変更してください。
- ヒンジ部分のある器具は開いた状態で洗浄・滅菌を行ってください。
- 洗浄不良は器具の変色や酸化の原因となります。
- 洗浄の際は医療器具及び歯科医療器具への使用を推奨された専用洗剤または消毒剤を使用し、使用時間や使用濃度等は洗剤メーカーの取扱説明書に従ってください。

滅菌

- ヒンジ部分がある器具は開いた状態で滅菌を行ってください。
- ヒューフレディグループは高圧蒸気滅菌を推奨しています。
- 高圧蒸気滅菌を行うことでカッターが切れにくくなる事はありません。
- 低温滅菌剤の使用は、ステンレスの化学変化を誘発しますので使用しないでください。
- 滅菌前にご使用の滅菌器が清潔で正常に動作していることをご確認ください。

腐食

- ヒューフレディグループの器具は腐食に耐性があります。メーカーが推奨する方法で管理して頂く事により、器具を腐食から防ぐ事ができます。
- 蓄積された残屑などの付着物はオレンジ色に変色しサビのように見えることがあります。
- サビのない器具を腐食した器具と一緒に取扱わないでください。サビは腐食した器具から腐食のない器具へと移ります。
- 腐食した器具は直ちに破棄されることを推奨します。

ステンレス製インスツルメント


- ステンレスは耐腐食性に富んでいますが、定められた濃度を超える化学物質や特定の化学物質にさらされると変色、腐食します。
- ステンレスを次の化学物質には接触させないでください：次亜塩素酸ナトリウム (家庭用漂白剤)、酒石酸 (ステインおよび歯石除去剤)、塩化アルミニウム、塩化バリウム、塩化第二水銀、塩化カルシウム、石炭酸、塩素化石灰、クエン酸、デーキン液、塩化第一鉄、ライゾール、塩化水銀、水銀塩、フェノール、過マンガン酸カリウム、チオシアン酸カリウム、塩化第一スズ。
- 次の化学物質は決してステンレスと合わせて使用しないでください：王水、塩化第二鉄、硫酸、塩酸、ヨウ素。

シャープニング

- カッターは定期的なシャープニングを推奨しております。
- 定期的にかッターを点検し、シャープニングが必要かどうかをご確認ください。
- 刃先が鋭利なカッターは、より効率的に作用するだけでなくカッターの寿命を長持ちさせます。

トラブルシューティング

問題	原因	対策
しみ	・超音波洗浄後の不十分なすすぎ	・流水下で30秒以上、しっかりすすいでください
	・超音波洗浄後の不十分な乾燥	・温水ですすいでください ・必要に応じてすすぎの後、カセットをアルコールに浸してください
	・洗浄液の交換をしていない	・超音波洗浄液は、汚れに応じて少なくとも1日1回は交換してください
	・滅菌器が汚れている	・滅菌器は毎週掃除をおこなってください ・タンクには蒸留水をご使用ください
さび	・カーボンインスツルメントからの腐食がステンレスインスツルメントに広がる	・ステンレス製とカーボン製のインスツルメントは分けて処理してください ・カーボンスチールインスツルメントは滅菌器のメーカーが指定する滅菌前に使用する防錆剤に浸してください
穴あき	・化学薬品による腐食	・インスツルメントをすすぎ完全に乾燥させてください ・メーカーが推奨する洗浄剤や薬液のみをご使用ください ・家庭用漂白剤や染み抜き、歯石除去剤は使用しないでください

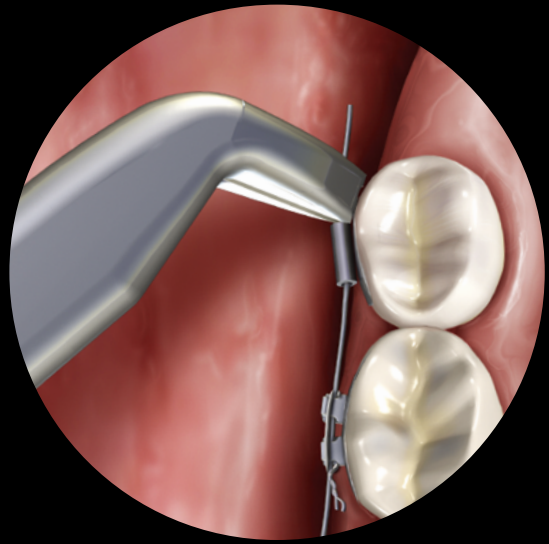

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2025年3月1日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：Enzymax, Hu-Friedy, Immunity Steel, Satin Steel, Precision Aligner ButtonsはTHINK Innovations, LLCの登録商標です。 ©2025 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-111J/2503

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice